


 **SWISSFLEX**  
e y e w e a r



  
perfetta vestibilità  
individualità modulare  
100% Swiss-made

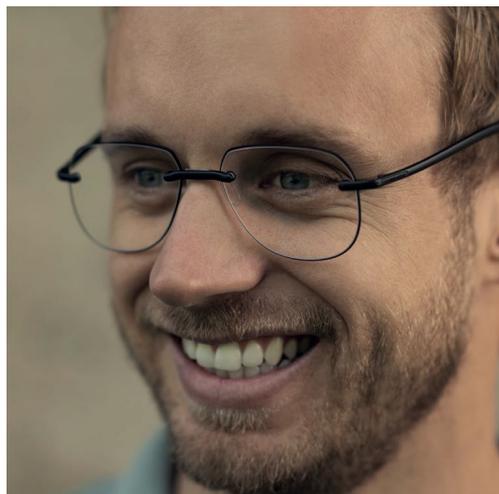

like  
wearing  
nothing.

# SISTEMA & COLLEZIONE 2020/21



**optiswiss**<sup>®</sup>



**vlnexjo**

## Indice dei contenuti

	Pagina
<b>1. Sistema Swissflex</b>	3
• Caratteristiche	
• Sistema	
• Vantaggi	
<b>2. Panoramica collezione</b>	4
• Sistemi di occhiali modulare	
• Sistema di vestibilità unico	
• Elementi innovativi della montatura	
<b>3. Approccio di vendita e promozione</b>	6
• Presenza in negozio	
• Approccio di vendita	
• Argomentazione e dimostrazione	
<b>4. Informazioni, assistenza e ordini</b>	7
<b>5. Sistema modello SF classic</b>	8
<b>6. Sistema modello SF rainbow</b>	24
<b>7. Sistema modello SF loop</b>	32
<b>8. Informazioni di montaggio</b>	48
• Naselli / Montaggio e smontaggio	
• Asta / Montaggio e smontaggio	
• Identificazione del modello, dimensioni e misura	
<b>9. Optiswiss, partner di lenti e di servizio</b>	51

## 1. Sistema Swissflex

**Swissflex Eyewear è un sistema di occhiali modulare  
per il miglior comfort con uno stile personalizzabile  
per tutte le età e molte attività**

### Caratteristiche

Il sistema di occhiali Swissflex è stato lanciato nel 1998 ed è ora disponibile in oltre 20.000 negozi partner in 50 paesi. Gli occhiali Swissflex sono caratterizzati da:

- **Vestibilità perfetta**  
Il polimero high-tech è flessibile, stabile, ultraleggero e privo di allergeni. I sistemi di adattamento per naso e orecchie permettono l'adattamento ideale a qualsiasi forma del viso.
- **Individualità modulare**  
Le versatili possibilità di combinazione creano funzionalità e stile personalizzabili.
- **100% Swiss-made**  
Lo sviluppo e la produzione in Svizzera garantiscono i migliori materiali, una lavorazione precisa e la massima qualità.

### Sistema

Swissflex Eyewear è venduto in tutto il mondo con un sistema collaudato tramite distributori locali indipendenti e con ottici partner formati:

- Collezione dimostrativa con 24+ occhiali Swissflex (> 50% adulti) per la presentazione in negozio
- Formazione iniziale del personale di vendita
- Occhiali con centratura della lente Brille per la regolazione da parte dell'ottico
- Vendita di almeno 1 montatura a settimana dell'intera gamma Swissflex
- Networking con oftalmologi, optometristi e ortottisti del quartiere

### Vantaggi (Ulteriori informazioni: [www.vinexio.ch](http://www.vinexio.ch))

Il Sistema Swissflex offre agli imprenditori del settore dell'ottica un modello di business unico, efficiente ed esclusivo con 8 vantaggi:

- elevata fidelizzazione del cliente
- bestseller a lungo termine
- adatto ad ogni età
- 100% fabbricato in Svizzera
- produttore indipendente
- nessun magazzino
- nessuna vendita online
- raccomandato da O's

## 2. Panoramica collezione

### System loop

#### SF loop

- si adatta alla forma della lente /10 forme di lenti  
- 8 colori lucidi



#### SF loop Kid

- si adatta alla forma della lente/ 13 forme di lenti  
- 12 colori lucidi




#### SF loop Baby

- si adatta alla forma della lente/ 4 forme di lenti  
- 8 colori lucidi



### System rainbow

#### SF rainbow

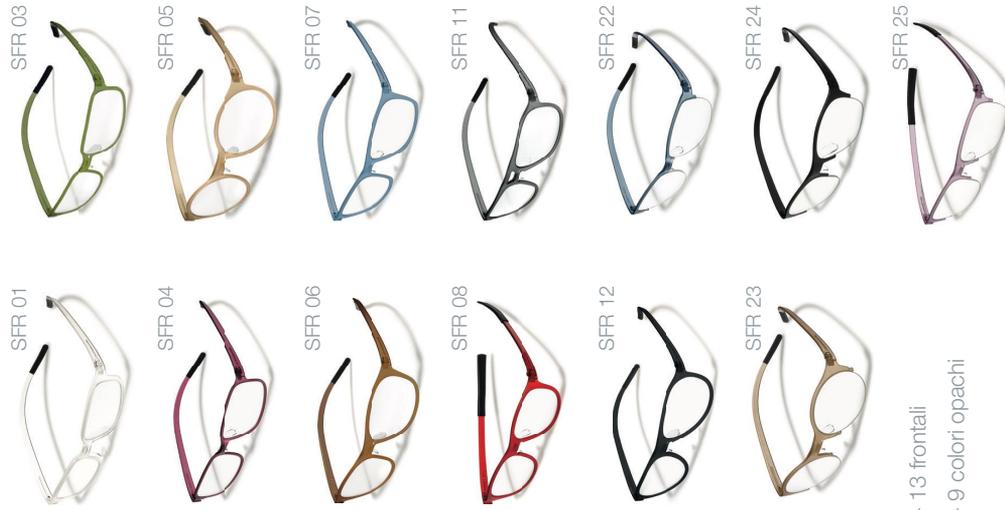

- 13 frontali  
- 9 colori opachi



### System classic

#### SF classic

- Molte forme di lenti  
- 21 colori lucidi  
(\*colore frosty possibile)



#### SF classic Contur

- Molte forme di lenti  
- 21 colori montatura lucidi (come SFC)  
- 22 colori di contorno



#### SF classic Kid

- Molte forme di lenti  
- 13 colori lucidi  
(\*possibilità colori glitter)



## Sistema di occhiali modulare




## Sistema unico di adattamento


### Naselli per tutti i modelli



### Pezzi terminali a seconda del modello

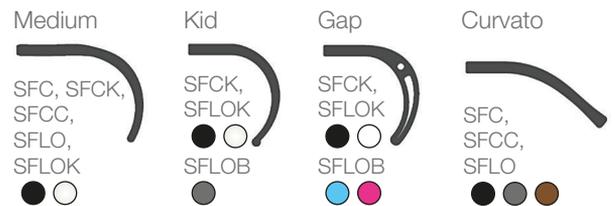

### Aste per tutti i modelli

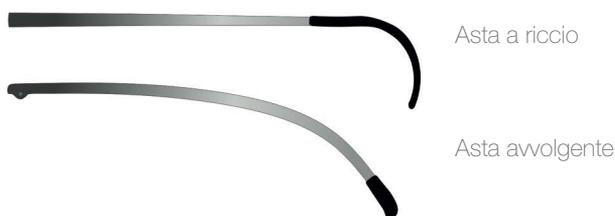

## Elementi montatura innovativi

### Ponti/Frontale

- fissaggio a bassa tensione
- adattabile alla forma della lente (loop)



### Aste

- deformazione termoplastica
- collegamento a click (1/100mm)



### Pezzi terminali

- sensibile alla temperatura corporea
- materiale antiscivolo



### Naselli

- vestibilità ergonomica
- diversi sistemi




### Colori

- diverse superfici
- composto (nel materiale)



### Materiale

- formulazione propria (stabile e flessibile)
- proprietà mediche

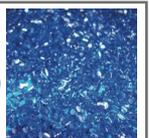

### 3. Approccio di vendita e promozione

#### Presenza in negozio – compatta e strutturata

La collezione dimostrativa con il sistema modelli per adulti e bambini è presentata a parete in modo compatto e strutturato con le sezioni Swissflex.



In questo modo, il sistema degli occhiali può essere spiegato facilmente e ci sono molte opportunità per la vendita di secondi occhiali al cliente e alle persone nelle vicinanze.

#### Approccio di vendita – Lasciar sperimentare il comfort

Il comprovato approccio di vendita si basa sull'esclusivo comfort di Swissflex – like wearing nothing.

##### 1. Valutare ogni cliente come potenziale indossatore Swissflex

##### 2. Far provare il comfort

Curiosità: Vuole vedere qualcosa di nuovo / unico / interessante / svizzero?

Interesse: far provare al cliente gli occhiali dimostrativi Swissflex

Desiderio: continuare se la reazione è positiva (wow, ma sono leggeri / appena percettibili...)

##### 3. Mostrare il sistema e le caratteristiche

Sistema di occhiali modulare, adattabile individualmente in termini di vestibilità e stile

Sistema di modelli senza montatura, mezzo cerchio, cerchio intero e per bambini

Dimostrazione delle caratteristiche specifiche con la montatura in mano

##### 4. Scegliere il sistema di modello


Mostrare e far sperimentare le possibilità di personalizzazione

##### 5. Configurazione degli occhiali personali

## Argomentazione e dimostrazione – con la montatura in mano

Unico punto di vendita	„Gli occhiali più comodi“ (il miglior comfort)			
Punti di forza	Perfetta vestibilità		Individualità modulare	100% Swiss-made
Ragione della supposizione	Sistemi unici per naso, testa e orecchio	Polimero ad alta tecnologia con proprietà medicali	Sistema modulare di elementi della montatura	Sviluppo e produzione in Svizzera
Vantaggi del prodotto	Vestibilità perfetta per ogni viso	Ultraleggero e stabile, flessibile, piacevole al tatto, anallergica, metal free	Occhiali personalizzabili	Progettazione e produzione high-tech con la massima precisione e cura
Vantaggi per i clienti	Sensazione su misura e visione sempre nitida senza affaticare gli occhi	Sensazione naturale senza irritazione della pelle (nessun punto di pressione, nessuno scivolamento, nessun mal di testa)	Occhiali che si abbinano perfettamente allo stile e allo scopo di utilizzo individuali	Notevole qualità con un equilibrio ottimale tra peso e stabilità
Dichiarazione del marchio	<b>like wearing nothing.</b>			

## Informazioni, assistenza e ordini

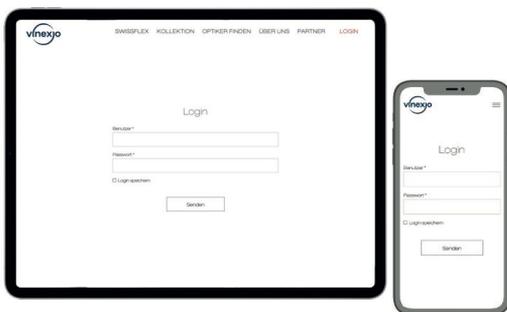

Sito web Info SF  
[www.vinexio.ch/login](http://www.vinexio.ch/login)  
 Nome Utente: Partner  
 Password: Swissflex7



Ordine occhiali completi SF su  
[www.optiswiss.ch](http://www.optiswiss.ch) - Portale ordini



Opuscolo informazioni SF

## 5. Sistema modello SF classic



SF classic




SF classic Contur




SF classic Kid

**SF classic / Sistema di adattamento**

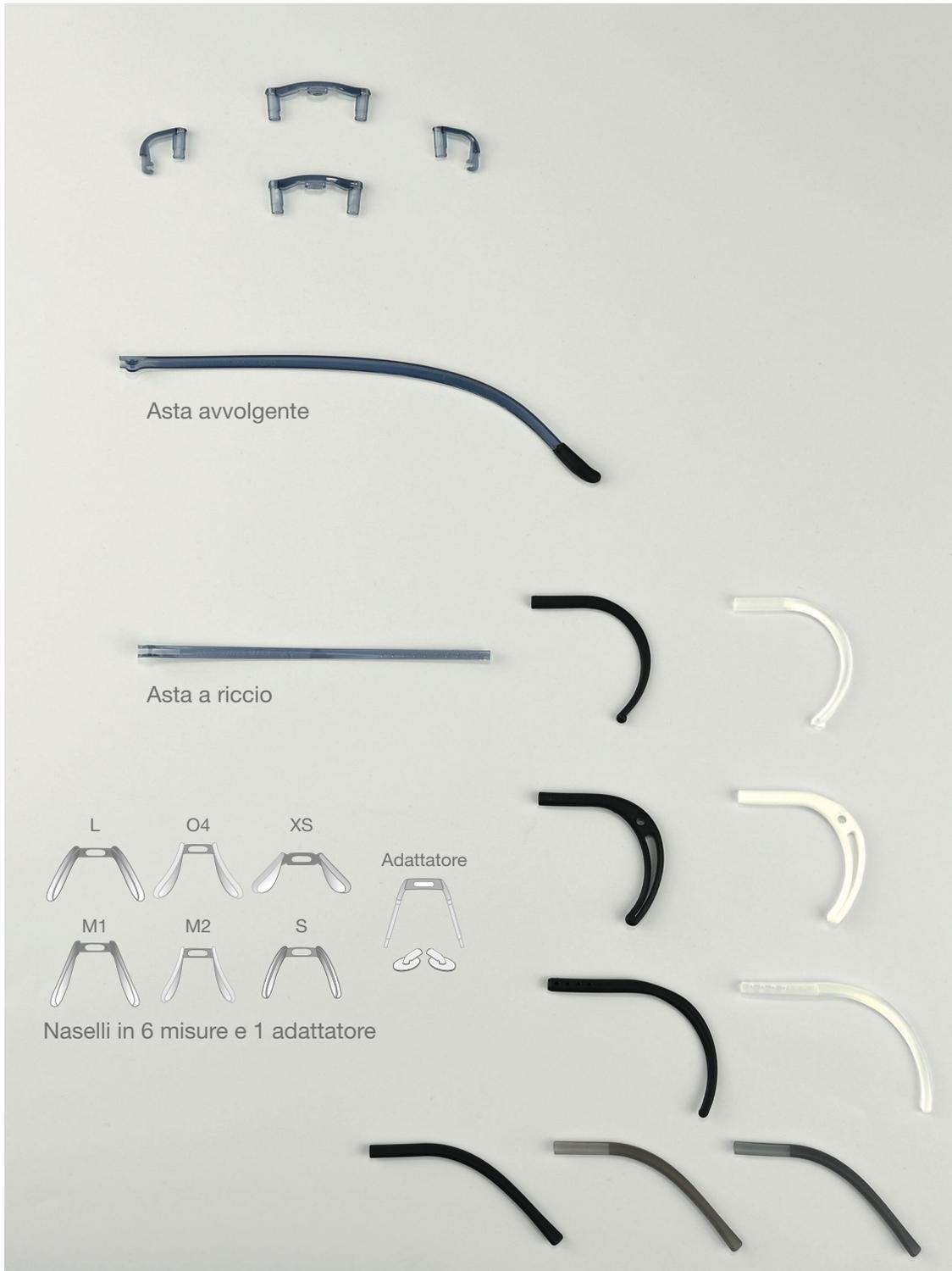

Ponte 1  
Ponte 2  
Tallone D / S

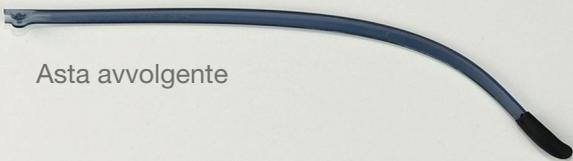

Asta avvolgente


Asta avvolgente  
(1 dimensione)



Asta a riccio



Asta a riccio  
Terminale  
Kid  
nero  
trasparente

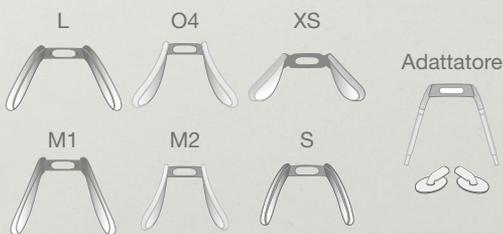

Naselli in 6 misure e 1 adattatore



Terminale  
Gap  
nero  
bianco



Terminale  
Medium  
nero  
trasparente



Terminale  
piegato  
nero  
marrone  
grigio



SF classic

 **SWISSFLEX**  
e y e w e a r

## SF classic / Scheda prodotto




## SF classic / Colori lucidi e frosty

	15	ice-blue*		67	crimson
	19	smokey*		68	mocca*
	33	green		72	lightpink*
	34	mint		75	whitesmoke
	35	pink-transparent		83	arctic-blue
	37	cinnamon*		84	cyan
	50	translucent*		89	white pearl
	52	brownish*		97	carribean blue
	53	ashen			
	60	black*			
	61	amethyst*			
	64	steel-blue*			
	65	orchid			

\* disponibile anche nei colori frosty



## SF classic / Forme lenti

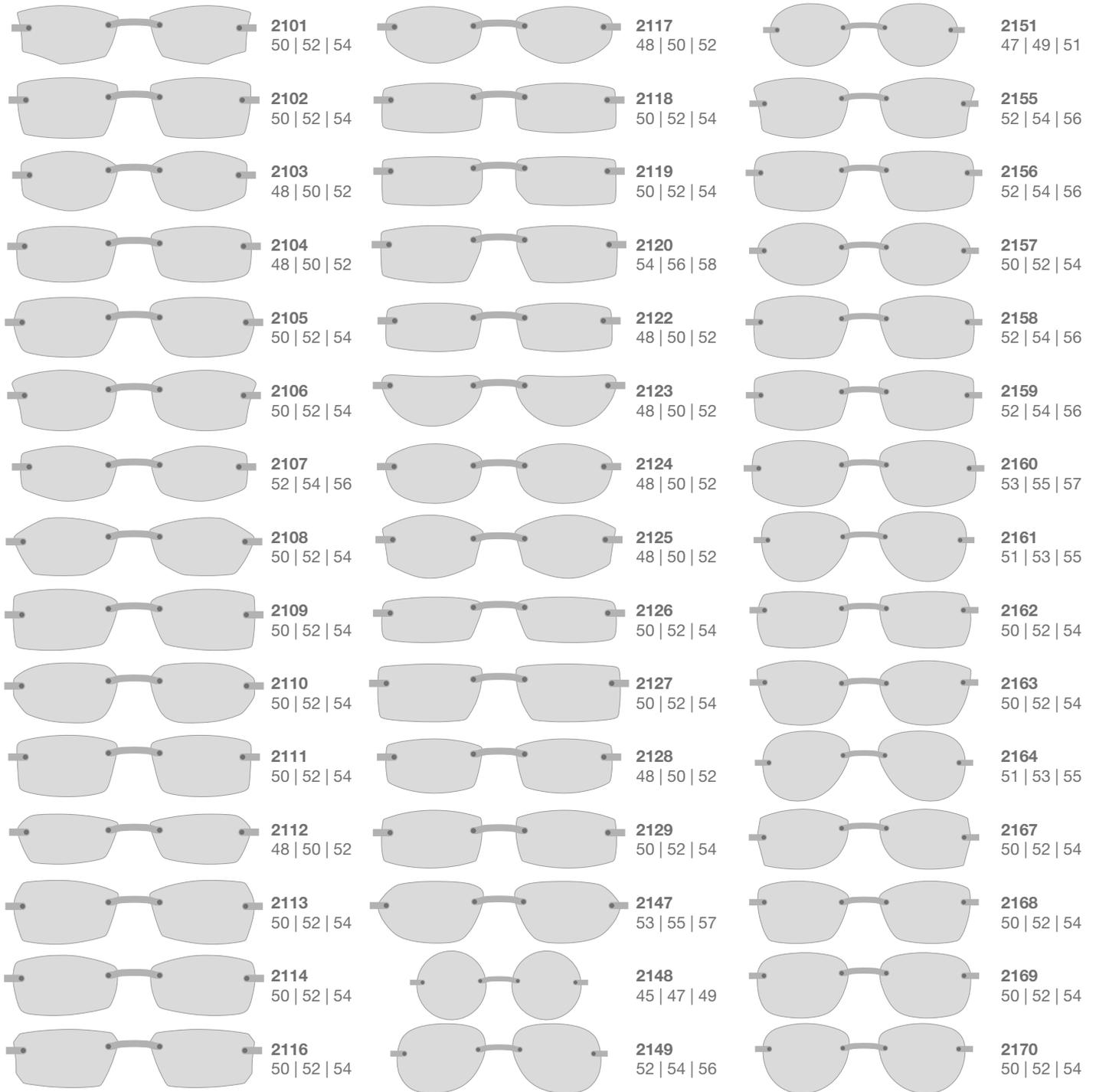

Altre forme lenti disponibili su:  
[www.vinexio.ch/login](http://www.vinexio.ch/login)  
 Nome utente: Partner  
 Password: Swissflex7





SF classic Contur

## SF classic Contur / Scheda prodotto



## SF classic Contur / Colori (Contur)



AV29 Havana striped



GR15 Gold



SF504 Graphite



AV36 Havana mellow



LG15 Rose Shiny



SF505 Ruby



B12 Dark Brown



NE1 Black



SF509 Azure



B32 Light Brown



RR15 Red Shiny



SF510 Pastel-blue



B55 Blue



S32 Light Smoke



SF511 Lilac



BL1 Dark Blue



SB15 Silver Shiny



SF516 Porcelaine



BW20 Blue Shiny



SF503 Olive




SF517 Copper



G15 Grey Green



## SF classic Contur / Forme lenti

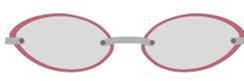	<b>101 D01</b> 47   49   51		<b>113 D01</b> 53   55   57		<b>132 D11</b> 50   52   54
	<b>102 D01</b> 52   54   56		<b>114 D01</b> 54   56   58		<b>132 D33</b> 50   52   54
	<b>103 D01</b> 52   54   56		<b>115 D01</b> 54   56   58		<b>133 D01</b> 51   53   55
	<b>104 D01</b> 50   52   54		<b>116 D01</b> 48   50   52		<b>133 D11</b> 51   53   55
	<b>105 D01</b> 54   56   58		<b>117 D01</b> 50   52   54		<b>134 D21</b> 49   51   53
	<b>106 D01</b> 51   53   55		<b>118 D01</b> 50   52   54		<b>138 D01</b> 49   51   53
	<b>107 D01</b> 50   52   54		<b>119 D01</b> 48   50   52		<b>139 D01</b> 51   53   55
	<b>107 D11</b> 50   52   54		<b>120 D01</b> 45   47   49		<b>140 D11</b> 51   53   55
	<b>107 D23</b> 50   52   54		<b>120 D40</b> 45   47   49		<b>140 D33</b> 51   53   55
	<b>107 D33</b> 50   52   54		<b>120 D51</b> 45   47   49		<b>141 D11</b> 50   52   54
	<b>107 D40</b> 50   52   54		<b>120 D52</b> 45   47   49		<b>141 D33</b> 50   52   54
	<b>108 D01</b> 50   52   54		<b>120 D53</b> 45   47   49		<b>142 D11</b> 45   47   49
	<b>109 D01</b> 50   52   54		<b>121 D01</b> 46   48   50		<b>142 D33</b> 45   47   49
	<b>110 D01</b> 50   52   54		<b>122 D01</b> 48   50   52		<b>201 D01</b> 50   52   54
	<b>111 D01</b> 50   52   54		<b>126 D01</b> 51   53   55		<b>206 D01</b> 51   53   55

Altre forme lenti disponibili su:  
[www.vinexio.ch/login](http://www.vinexio.ch/login)  
 Nome utente: Partner  
 Password: Swissflex7





SF classic Kid

## SF classic Kid / Scheda prodotto



















## SF classic Kid / Colori lucidi

	15	ice-blue*
	16	violet-transparent*
	34	mint
	35	pink-transparent*
	50	translucent*
	51	peach
	62	turquoise*
	64	steel-blue
	67	crimson*
	71	khaki
	72	lightpink*
	78	mango
	83	arctic-blue

\* disponibile anche nel colore glitter




## SF classic Kid / Forme lenti

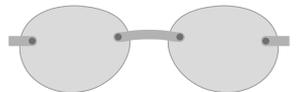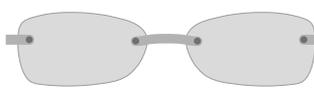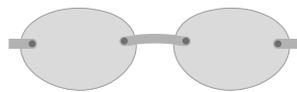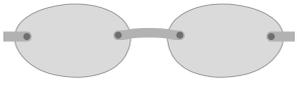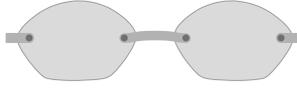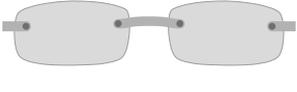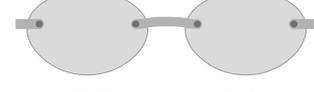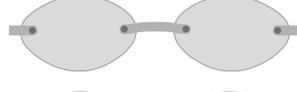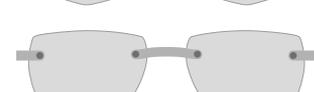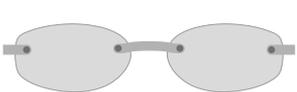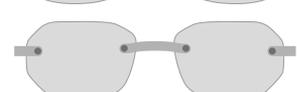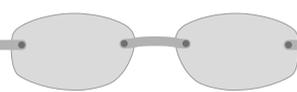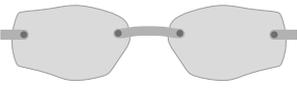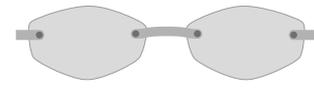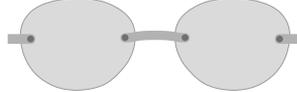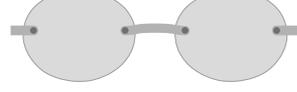	<b>02</b> 40   42   44		<b>1622</b> 47   49   51		<b>1807</b> 40   42   44
	<b>33</b> 40   42   44		<b>1659</b> 44   46   48		<b>1808</b> 43   45   47
	<b>42</b> 42   44   46		<b>1705</b> 44   46   48		<b>1809</b> 42   44   46
	<b>54</b> 42   44   46		<b>1761</b> 45   47   49		<b>1810</b> 40   42   44
	<b>179</b> 46   48   50		<b>1762</b> 46   48   50		<b>1811</b> 40   42   44
	<b>379</b> 41   43   45		<b>1763</b> 44   46   48		<b>1816</b> 40   42   44
	<b>386</b> 41   43   45		<b>1765</b> 46   48   50		<b>1818</b> 39   41   43
	<b>409</b> 40   42   44		<b>1766</b> 44   46   48		<b>1820</b> 40   42   44
	<b>513</b> 40   42   44		<b>1767</b> 44   46   48		<b>1821</b> 40   42   44
	<b>630</b> 42   44   46		<b>1768</b> 42   44   46		<b>1822</b> 39   41   43
	<b>746</b> 45   47   49		<b>1770</b> 44   46   48		<b>1823</b> 41   43   45
	<b>776</b> 42   44   46		<b>1798</b> 41   43   45		<b>1824</b> 41   43   45
	<b>906</b> 42   44   46		<b>1799</b> 44   46   48		<b>1825</b> 40   42   44
	<b>999</b> 40   42   44		<b>1803</b> 45   47   49		<b>1827</b> 43   45   47
	<b>1295</b> 43   45   47		<b>1804</b> 43   45   47		<b>1828</b> 41   43   45
	<b>1539</b> 45   47   49		<b>1805</b> 42   44   46		<b>1829</b> 40   42   44

Altre forme lenti disponibili su:  
[www.vinexio.ch/login](http://www.vinexio.ch/login)  
 Nome utente: Partner  
 Password: Swissflex7



## SF classic / Regolazione

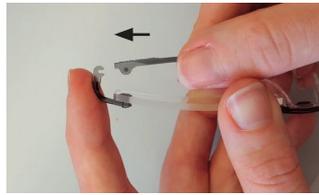


### Asta / Montaggio

Fissare il tallone (trattenere con le dita). Tenere l'asta parallela alla parte anteriore e fare clic sulla cerniera.



Montatura per occhiali completamente assemblata (non direzionata).

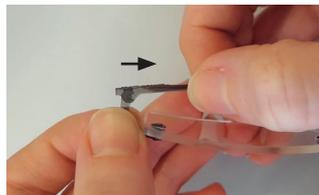


### Asta / Smontaggio

Smontaggio dell'asta. Fissare il tallone con il pollice e l'indice. Tirare al contrario l'asta chiusa in direzione dell'estremità della staffa (notare il senso di apertura della cerniera!).



### Naselli / Montaggio

Preparazione del cuscinetto di montaggio. Inserimento dell'ausilio per il montaggio (cuneo) nel cuscinetto.

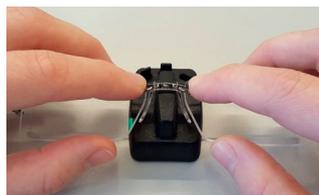

Posizionare il ponte con il fungo in verticale sul supporto di montaggio nel cuscinetto e premere fino a quando non scatta in posizione.




Verificare che la misura sia corretta.




### Naselli / Smontaggio

Premere l'ala con entrambi i pollici verso la superficie anteriore della lente finché il cuscinetto non scatta fuori.

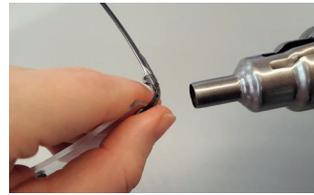


### Regolare il tallone

Riscaldare l'angolo in modo uniforme da due direzioni con l'asta aperta. Proteggere la lente. Regolare la temperatura a distanza.

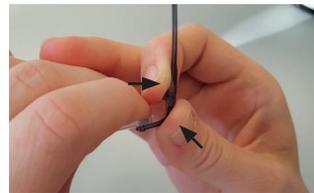


### Ingrandire l'angolo di apertura

Se necessario, allargare con attenzione l'angolo riscaldato.

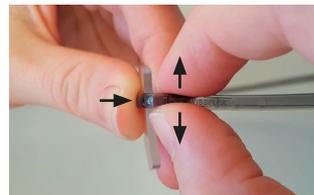

### Modificare l'inclinazione

Modificare l'inclinazione sull'angolo riscaldato in caso di necessità.

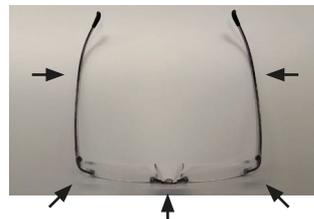

### Possibili campi di regolazione

- Ponte (Rimozione dei cuscinetti necessaria in anticipo)
- Talloni
- Asta (Non riscaldare la zona della cerniera!)

Regolare la temperatura a distanza.



Fig.1: Gestione corretta

### Pulizia corretta

Per la pulizia con un panno, fissare sempre la montatura su due punti (Ponte + talloni) della lente da pulire.

Evitare il movimento rotatorio tra la lente e la parte del modulo.

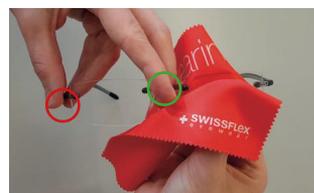


Fig.2: Gestione errata

Si consiglia di pulire gli occhiali con acqua e sapone. Macchie e residui di adesivo sulla montatura possono essere rimossi con dell'acetone.

Evitare la pulizia con solventi e alcol (ad es. Isopropanolo).

Acqua e sapone



Acetone



Alcol





## 6. Sistema modello SF rainbow



Cerchio pieno



Mezzo cerchio

**SF rainbow / Sistema di adattamento**



**Sezione centrale**  
(9 frontal)

**Asta avvolgente**  
(1 misura)


**Asta a riccio**  
Terminale  
dritto  
nero

**Terminale piegato**  
nero  
trasparente marrone  
trasparente grigio


**Terminale Medium**  
nero

Asta avvolgente

Asta a riccio

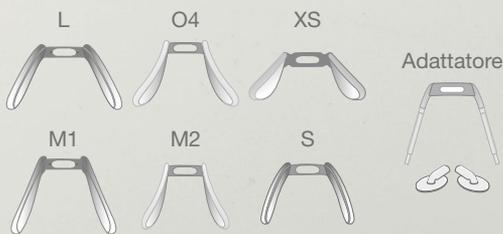

Naselli in 6 misure e 1 adattatore

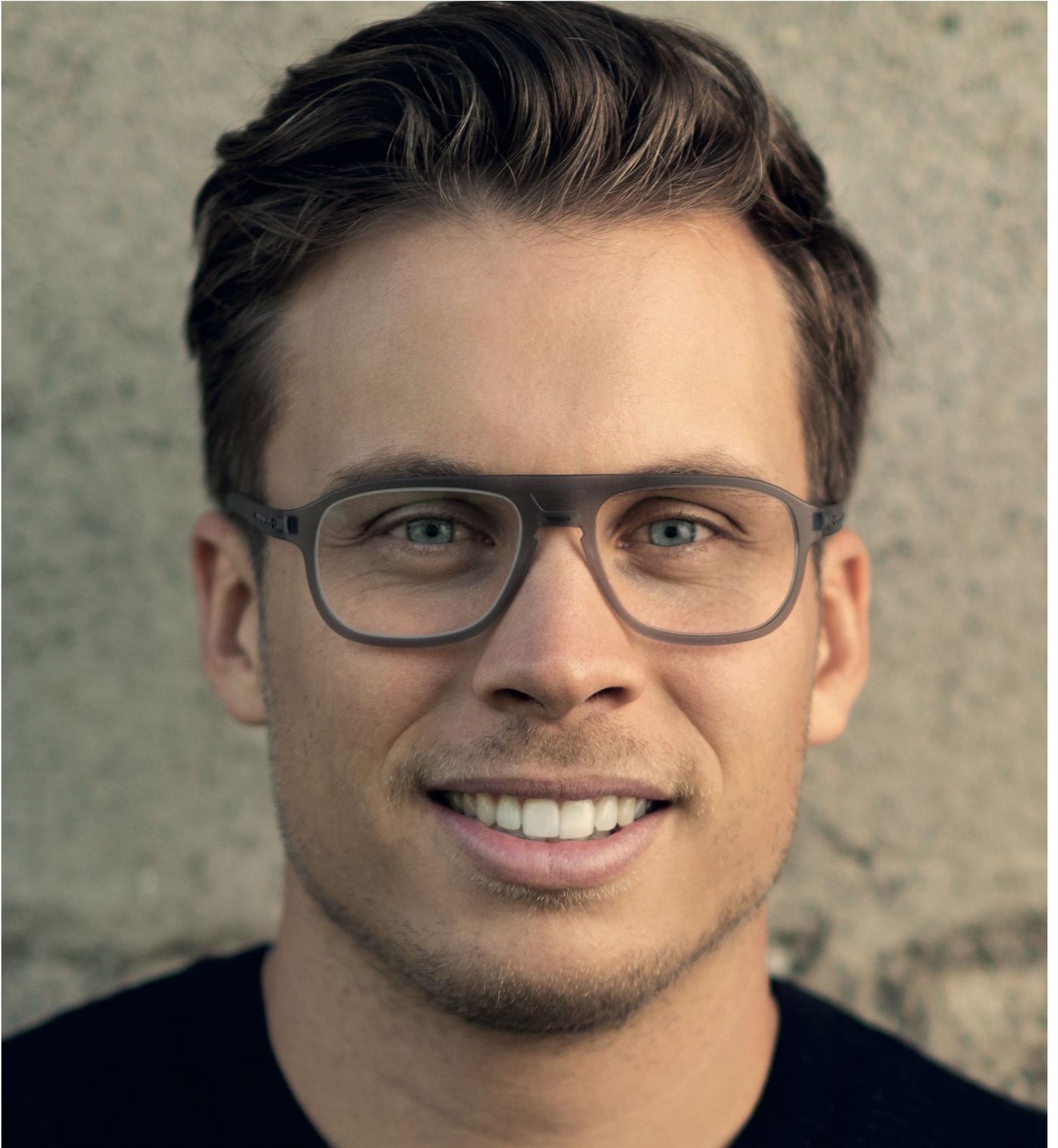

SF rainbow

## SF rainbow / Scheda prodotto



## SF rainbow / Colori matt

	15	ice-blue
	19	smokey
	37	cinnamon
	50	translucent
	52	brownish
	60	black
	61	amethyst
	64	steel blue
	67	crimson



## SF rainbow / Forme lenti



**R-01**  
48



**R-07**  
56



**R-03**  
52



**R-08**  
48



**R-04**  
54



**R-11**  
53



**R-05**  
49,5



**R-12**  
54



**R-06**  
55



**R-22**  
Forma 01\*  
52



**R-24**  
Forma 02\*  
52



**R-23**  
Forma 01\*  
50




**R-25**  
Forma 01\*  
56

\* Altre forme lenti disponibili su:  
[www.vinexio.ch/login](http://www.vinexio.ch/login)  
 Nome utente: Partner  
 Password: Swissflex7



## SF rainbow / Regolazione

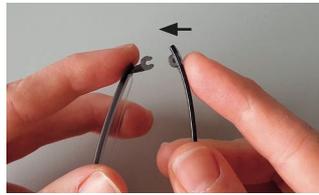

### Asta / Montaggio

Fissare il tallone (trattenere con le dita).  
Tenere l'asta parallela alla parte anteriore e fare clic sulla cerniera.



Montatura per occhiali completamente assemblata (non direzionata).



### Asta / Smontaggio

Chiudere l'asta.  
Fissare il tallone con il pollice e l'indice.  
Tenere il pollice contro l'asta, aprire l'asta lentamente finché non scatta in fuori.



### Naselli / Montaggio

Preparazione del cuscinetto di montaggio.  
Inserimento dell'ausilio per il montaggio (cuneo) nel cuscinetto.



Posizionare il ponte con il fungo in verticale sul supporto di montaggio nel cuscinetto e premere fino a quando non scatta in posizione.



Verificare che la misura sia corretta.



### Naselli / Smontaggio


Premere l'ala con entrambi i pollici verso la superficie anteriore della lente finché il cuscinetto non scatta fuori.



### Regolare l'angolo

Riscaldare l'angolo in modo uniforme da due direzioni con l'asta aperta.  
Proteggere la lente.

Regolare la temperatura a distanza.

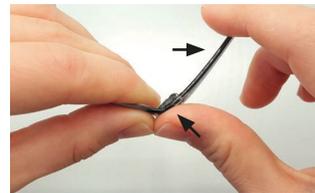


Modificare l'inclinazione sull'angolo riscaldato in caso di necessità.



### Regolare l'asta

Riscaldare l'asta lentamente e in modo uniforme da due direzioni.  
Regolare la temperatura a distanza.

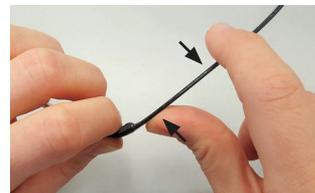


Modificare l'inclinazione sull'angolo riscaldato in caso di necessità.




### Modificare l'inclinazione

Riscaldare lentamente e in modo uniforme la montatura davanti al tallone e dietro l'angolo.

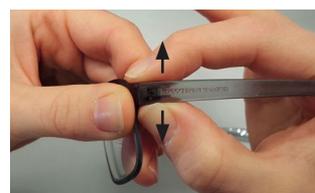

Modificare l'inclinazione sull'angolo riscaldato in caso di necessità.

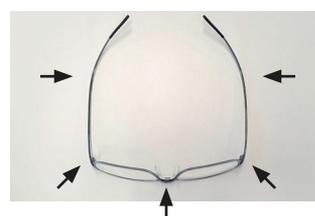

### Possibili campi di regolazione

- Angoli (rimozione anticipata dei cuscinetti necessaria)
- Asta (non riscaldare la zona della cerniera!)

Regolare la temperatura a distanza.

Acqua e sapone



Acetone



Alcol





## 7. Sistema modello SF loop



SF loop




SF loop Kid



SF loop Baby

## SF loop / Sistema di adattamento

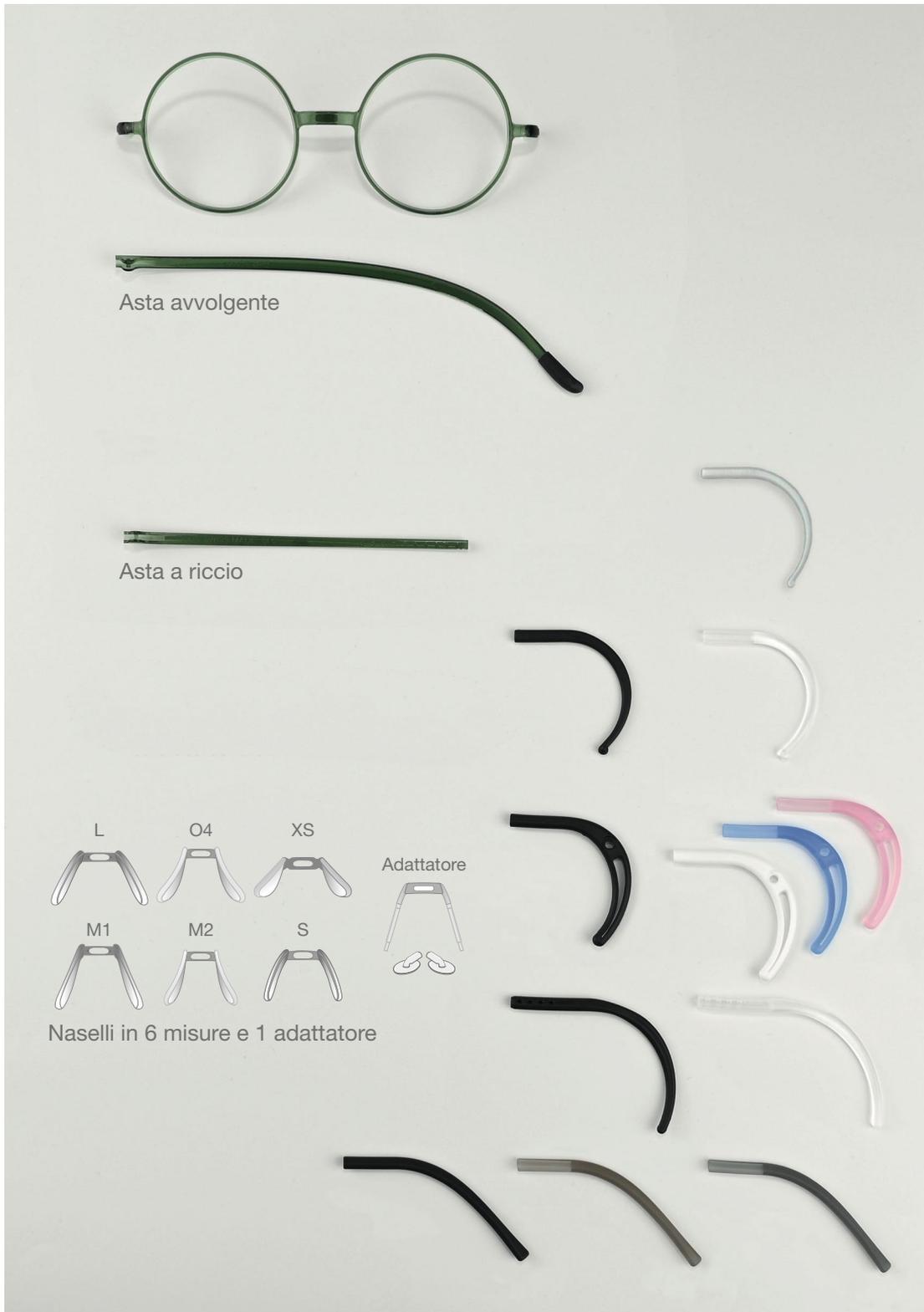

**Sezione centrale**  
6 dimensioni cerchio:  
36, 38, 40, 42, 44, 48

**Sezione centrale Baby**  
2 dimensioni cerchio:  
34, 36  
Asta senza cerniera

**Asta avvolgente**  
(1 misura)

**Asta a riccio**

**Terminale Baby**  
grigio

**Terminale Kid**  
nero  
trasparente

**Terminale Gap**  
nero  
bianco  
azzurro (solo Baby)  
rosé (solo Baby)

**Terminale Medium**  
nero  
trasparente

**Terminale piegato**  
nero  
marrone  
grigio



SF loop

 **SWISSFLEX**  
e y e w e a r

## SF loop / Scheda prodotto

**Asta a riccio**  
- 3 terminali

**Asta avvolgente**  
- 1 terminale

**Naselli**  
- 7 misure

**10 frontali in**  
**3 misure**

**8 colori lucidi**




## SF loop (Ø42, 44, 48) / Colori lucidi


	15	ice-blue
	19	smokey
	33	green
	37	cinnamon
	50	translucent
	60	black
	67	crimson
	83	arctic-blue




## SF loop / Forme lenti

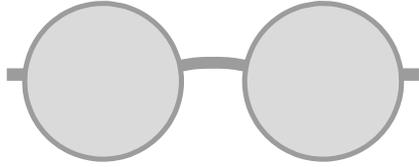

**5401**  
Boxing: 42 | 44 | 48  
Cerchio: 42 | 44 | 48

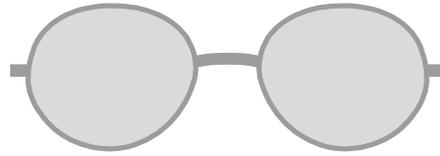


**5406**  
Boxing: 46 | 48 | 52  
Cerchio: 42 | 44 | 48

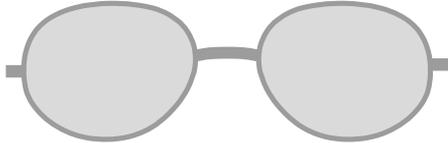


**5402**  
Boxing: 47 | 49 | 53  
Cerchio: 42 | 44 | 48




**5407**  
Boxing: 49 | 52 | 56  
Cerchio: 42 | 44 | 48

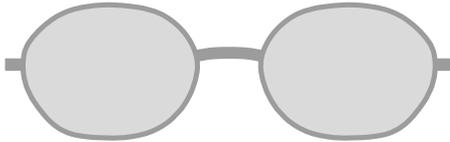


**5403**  
Boxing: 47 | 50 | 54  
Cerchio: 42 | 44 | 48

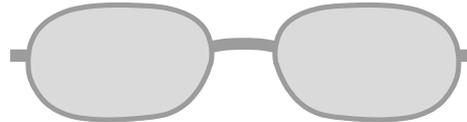


**5408**  
Boxing: 50 | 52 | 57  
Cerchio: 42 | 44 | 48

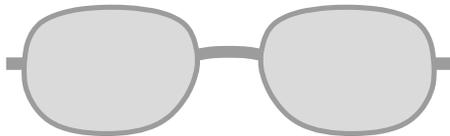


**5404**  
Boxing: 47 | 49 | 54  
Cerchio: 42 | 44 | 48

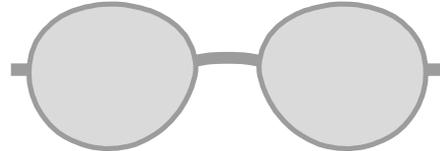

**5409**  
Boxing: 45 | 47 | 52  
Cerchio: 42 | 44 | 48

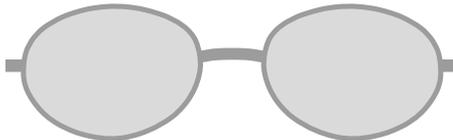

**5405**  
Boxing: 48 | 50 | 55  
Cerchio: 42 | 44 | 48

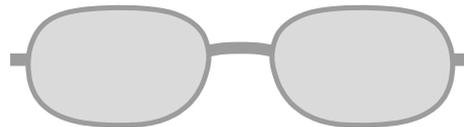

**5410**  
Boxing: 49 | 51 | 56  
Cerchio: 42 | 44 | 48



SF loop Kid

 **SWISSFLEX**  
e y e w e a r

## SF loop Kid / Scheda prodotto

**Asta a riccio**  
- 3 terminali

**Naselli**  
- 4 misure

**13 frontali in**  
**3 misure**

**12 colori lucidi**




## SF loop Kid (Ø36, 38, 40) / Colori lucidi


	15	ice-blue
	16	violet-transparent
	34	mint
	35	pink-transparent
	37	cinnamon
	50	translucent
	51	peach
	62	turquoise
	64	steel-blue
	67	crimson
	72	lightpink
	83	arctic-blue



## SF loop Kid / Forme lenti

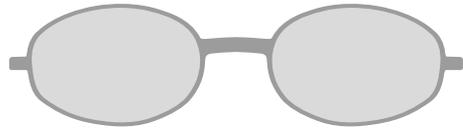

**5101**  
Boxing: 42 | 44 | 46  
Cerchio: 36 | 38 | 40

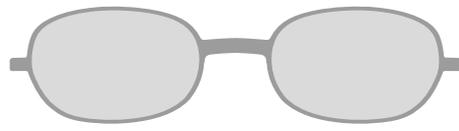


**5108**  
Boxing: 43 | 45 | 47  
Cerchio: 36 | 38 | 40



**5102**  
Boxing: 43 | 45 | 47  
Cerchio: 36 | 38 | 40




**5109**  
Boxing: 42 | 44 | 46  
Cerchio: 36 | 38 | 40

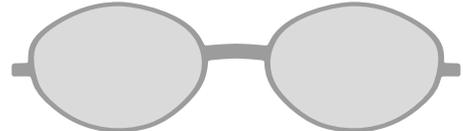


**5103**  
Boxing: 42 | 44 | 46  
Cerchio: 36 | 38 | 40




**5110**  
Boxing: 39 | 41 | 43  
Cerchio: 36 | 38 | 40

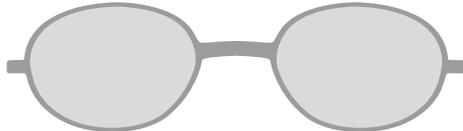

**5104**  
Boxing: 42 | 44 | 46  
Cerchio: 36 | 38 | 40

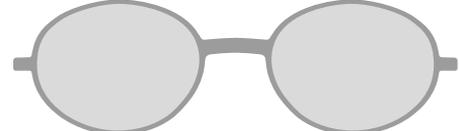


**5111**  
Boxing: 41 | 43 | 45  
Cerchio: 36 | 38 | 40

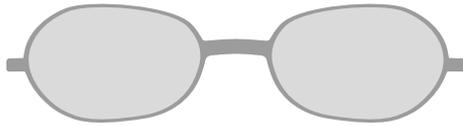


**5105**  
Boxing: 43 | 45 | 47  
Cerchio: 36 | 38 | 40




**5112**  
Boxing: 42 | 44 | 46  
Cerchio: 36 | 38 | 40

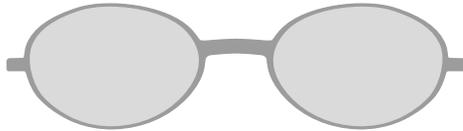

**5106**  
Boxing: 42 | 44 | 46  
Cerchio: 36 | 38 | 40

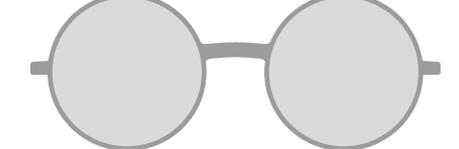

**5113**  
Boxing: 36 | 38 | 40  
Cerchio: 36 | 38 | 40

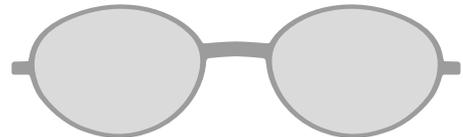


**5107**  
Boxing: 42 | 44 | 46  
Cerchio: 36 | 38 | 40



SF loop Baby

## SF loop Baby / Scheda prodotto

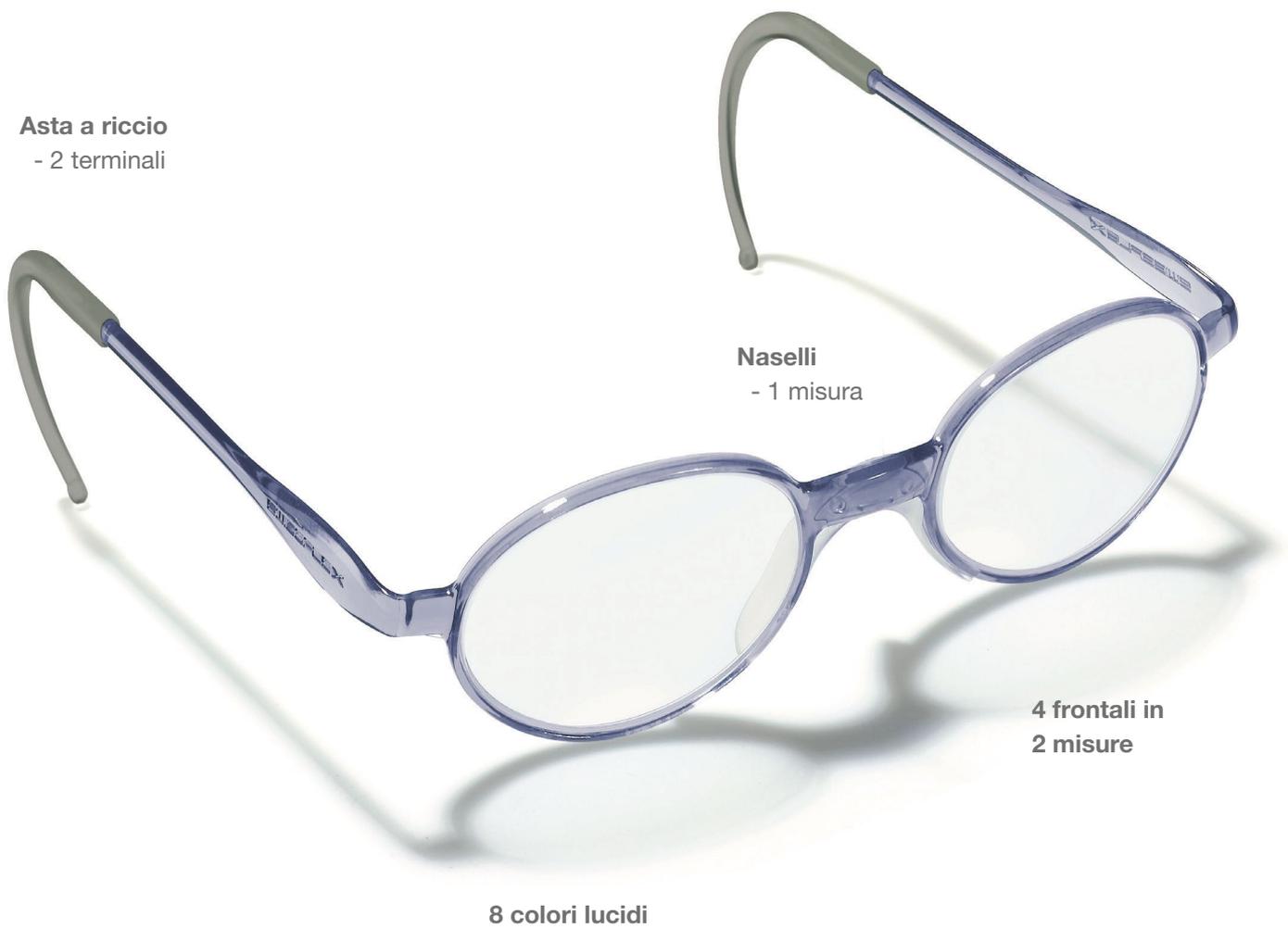

**Asta a riccio**  
- 2 terminali

**Naselli**  
- 1 misura

**4 frontali in**  
**2 misure**


**8 colori lucidi**

## SF loop Baby (Ø34, 36) / Colori lucidi

	15	ice-blue
	16	violet-transparent
	34	mint
	35	pink-transparent
	50	transparent
	51	peach
	72	lightpink
	83	arctic-blue




## SF loop Baby / Forme lenti

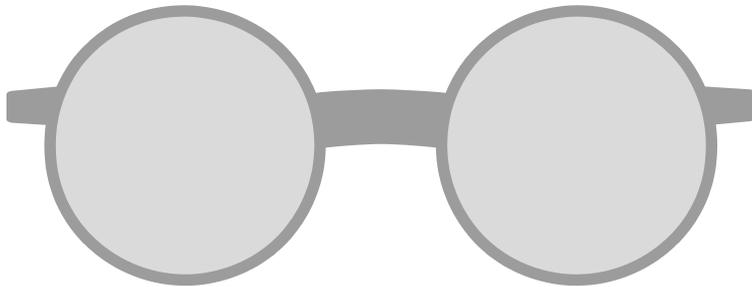

### Modello 5201

Boxing: 34 | 36


Cerchio: 34 | 36

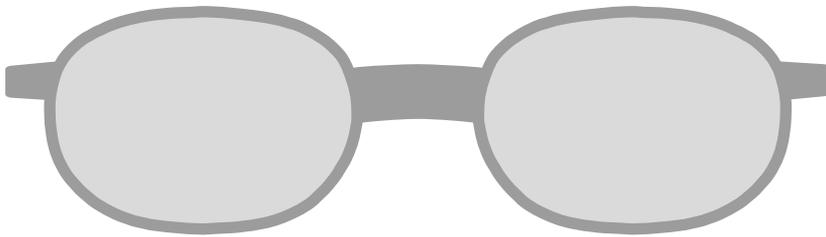

### Modello 5202

Boxing: 39 | 41


Cerchio: 34 | 36

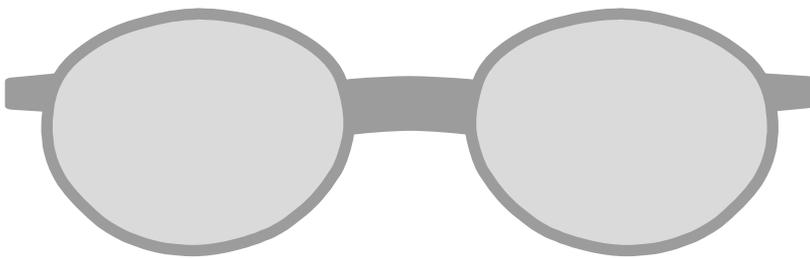

### Modello 5203

Boxing: 38 | 40

Cerchio: 34 | 36

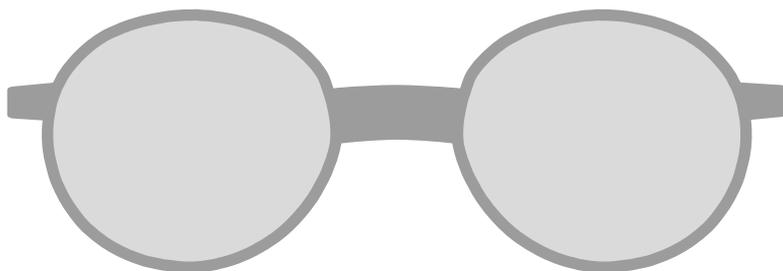


### Modello 5204

Boxing: 36 | 38


Cerchio: 34 | 36

## SF loop / Regolazione

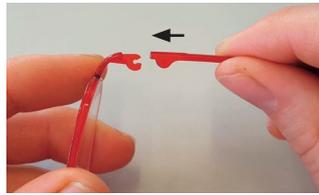

### Asta / Montaggio


Fissare il tallone (trattenere con le dita). Tenere l'asta parallela alla parte anteriore e fare clic sulla cerniera.

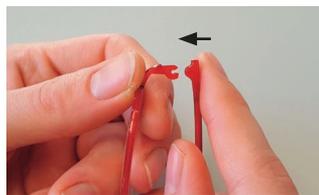

Altra possibilità: fissare il tallone. Posizionare l'asta parallela alla parte anteriore. Inserire l'asta nella cerniera finché non scatta in posizione.



Montatura per occhiali completamente assemblata (non direzionata).

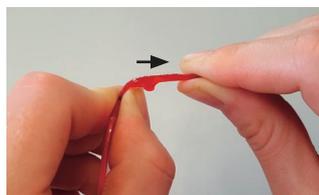


### Asta / Smontaggio

Aprire l'asta. Fissare il tallone con il pollice e l'indice. Tirare al contrario l'asta chiusa in direzione dell'estremità della staffa.



### Naselli / Montaggio


Preparazione del cuscinetto di montaggio, Inserimento dell'ausilio per il montaggio (cuneo) nel cuscinetto.

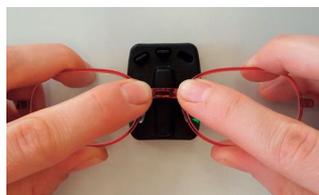

Posizionare il ponte con il fungo in verticale sul supporto di montaggio nel cuscinetto e premere fino a quando non scatta in posizione.




Verificare che la misura sia corretta.

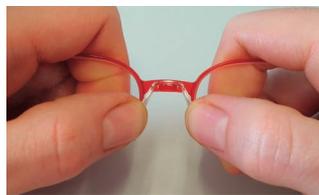


### Naselli / Smontaggio

Premere l'ala con entrambi i pollici verso la superficie anteriore della lente finché il cuscinetto non scatta fuori.

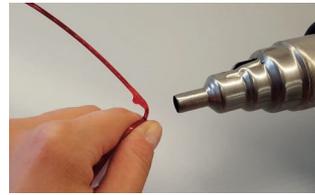


### Regolare il tallone

Riscaldare l'angolo in modo uniforme da due direzioni con l'asta aperta. Proteggere la lente. Regolare la temperatura a distanza.

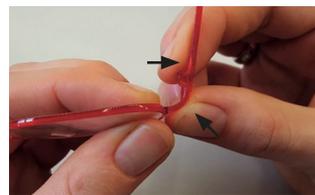


### Ingrandire l'angolo di apertura

Se necessario, allargare con attenzione l'angolo riscaldato.

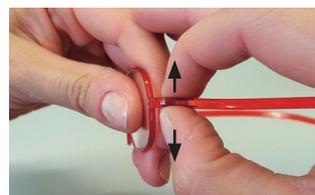

### Modificare l'inclinazione

Modificare l'inclinazione sull'angolo riscaldato in caso di necessità.

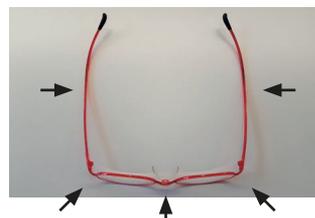

### Possibili campi di regolazione

- Ponte (Rimozione dei cuscinetti necessaria in anticipo)
- Talloni
- Asta (Non riscaldare la zona della cerniera!)

Regolare la temperatura a distanza.

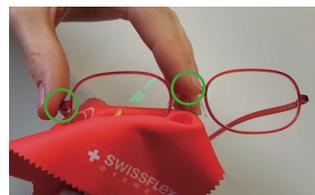


Fig.1: Gestione corretta

### Pulizia corretta

Per la pulizia con un panno, fissare sempre la montatura su due punti (Ponte + talloni) della lente da pulire.

Evitare movimenti oscillanti.



Fig.2: Gestione errata

Si consiglia di pulire gli occhiali con acqua e sapone. Macchie e residui di adesivo sulla montatura possono essere rimossi con dell'acetone.

Evitare la pulizia con solventi e alcol (ad es. Isopropanolo).

Acqua e sapone



Acetone



Alcol




## SF loop Baby / Regolazione




### Regolare il tallone

Riscaldare l'angolo in modo uniforme da due direzioni con l'asta aperta.  
Proteggere la lente.  
Regolare la temperatura a distanza.

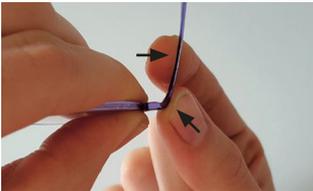


Se necessario, allargare con attenzione l'angolo riscaldato.

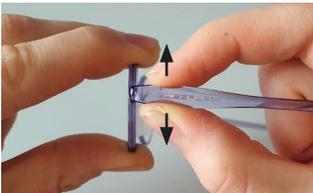

### Modificare l'inclinazione

Modificare l'inclinazione sull'angolo riscaldato in caso di necessità.

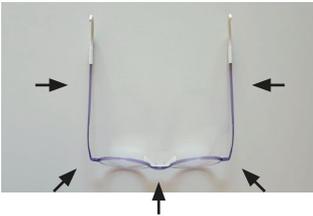

### Possibili punti di regolazione

- Ponte
- Talloni
- Asta

Regolare la temperatura a distanza.

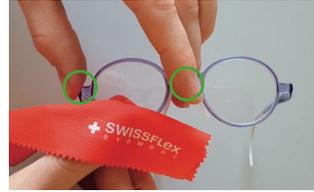


Fig.1: Gestione errata



Fig.2: Gestione errata

### Pulizia corretta

Per la pulizia con un panno, fissare sempre la montatura su due punti (Ponte + talloni) della lente da pulire.

Evitare movimenti oscillanti.

Si consiglia di pulire gli occhiali con acqua e sapone.  
Macchie e residui di adesivo sulla montatura possono essere rimossi con dell'acetone.

Evitare la pulizia con solventi e alcol (ad es. Isopropanolo).

Acqua e sapone



Acetone




Alcol



## 8. Informazioni di montaggio

### Naselli / Montaggio e smontaggio


I naselli modulari ed ergonomici garantiscono una buona tenuta senza punti di pressione.  
6 misure (\* anche per bambini), 1 adattatore

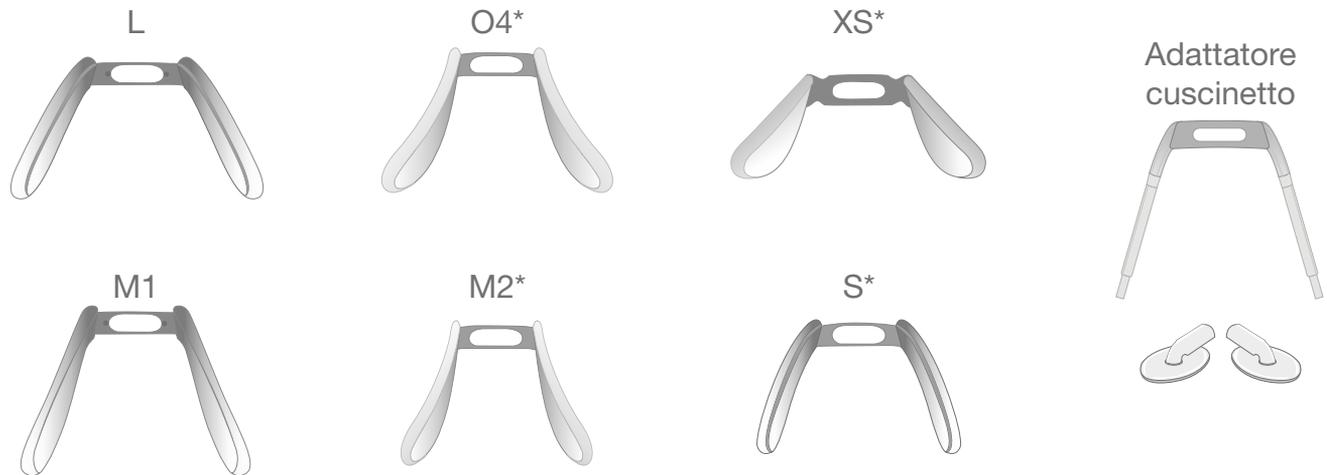

#### Montaggio (con dispositivo di montaggio):


Preparazione:

1. Applicare il cuscinetto (alette rivolte verso il basso).
2. Premere l'ausilio di montaggio (cuneo) nella fessura per il fissaggio.

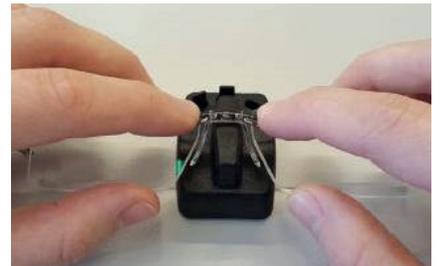

Agganciare:

1. Posizionare la parte centrale con il fungo rivolto verso il basso verticalmente sul cuneo.
2. Premere la parte centrale verticalmente finché il cuscinetto non scatta in posizione.

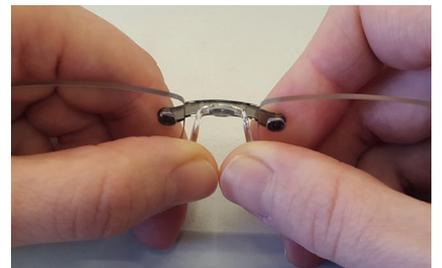

#### Smontaggio (Ausclicken):




1. Posizionare la montatura con il nasello rivolto verso il basso.
2. Premere l'ala in modo sincrono con entrambi i pollici attraverso l'apertura del naso della montatura fino a quando il cuscinetto non scatta fuori.

#### Suggerimento


1. Se maneggiato correttamente, il nasello non verrà danneggiato quando viene agganciato e sganciato.
2. Per una tenuta migliore, agganciare e sganciare intenzionalmente.

## Asta / Montaggio e smontaggio

❖ Istruzioni di montaggio dettagliate per modello nella sezione „Listino“.
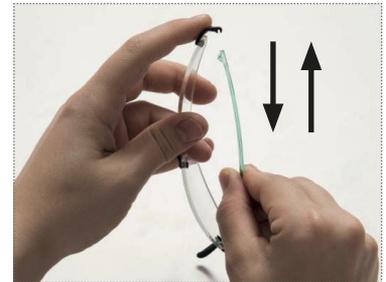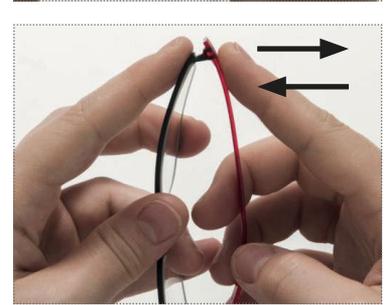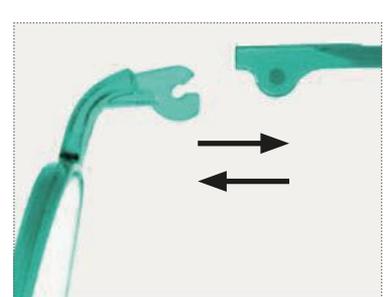
<p>SF classic</p>	<p>Montaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissare il tallone</li> <li>• Posizionare l'asta parallela alla parte anteriore</li> <li>• Inserire l'asta nella cerniera fino allo scatto</li> </ul> <p>Smontaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Notare la direzione di apertura della cerniera!</b></li> <li>• Fissare la guancia</li> <li>• Muovere la staffa al contrario, in direzione dell'estremità della staffa</li> </ul>	
<p>SF rainbow</p>	<p>Montaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissare il tallone</li> <li>• Posizionare l'asta parallela alla parte anteriore</li> <li>• Inserire l'asta nella cerniera fino allo scatto</li> </ul> <p>Smontaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Notare la direzione di apertura della cerniera!</b></li> <li>• Fissare l'angolo con il pollice e il dito</li> <li>• Aprire leggermente l'asta fino a quando non scatta in fuori</li> </ul>	
<p>SF loop</p>	<p>Montaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissare il tallone</li> <li>• Posizionare la staffa lungo la cerniera</li> <li>• Inserire l'asta nella cerniera fino allo scatto</li> </ul> <p>Smontaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Notare la direzione di apertura della cerniera!</b></li> <li>• Fissare il tallone</li> <li>• Muovere la staffa al contrario, in direzione dell'estremità della staffa</li> </ul>	

## Identificazione del modello, dimensioni e misura

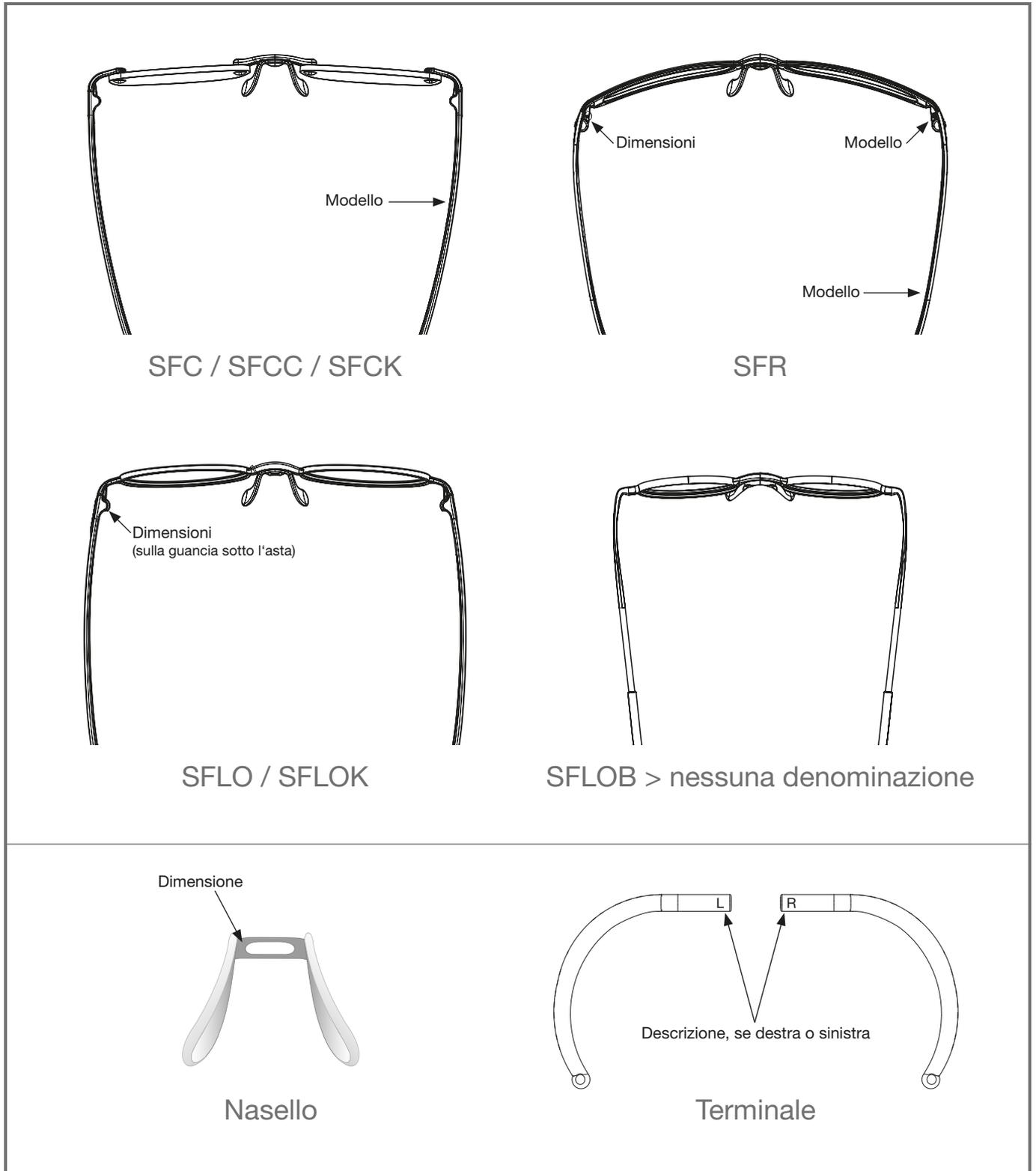

## 9. Optiswiss, partner di lenti e di servizio

Optiswiss, il principale produttore svizzero di lenti per occhiali, è il partner esclusivo per l'ordinazione, l'applicazione e la spedizione di occhiali Swissflex in Svizzera.

Gli ordini vengono effettuati tramite il portale di ordinazione Optiswiss, che facilita la configurazione e l'ordinazione della montatura, vetro compreso. Il personale competente del servizio clienti Optiswiss è a disposizione per consigli e domande.



**optiswiss**<sup>®</sup>  
original since 1937

PRECISION  
QUALITY  
TECHNOLOGY

LENTI  
MADE IN SWITZERLAND 

[www.optiswiss.com](http://www.optiswiss.com)



Distribuzione Swissflex Eyewear Svizzera

Vinexio GmbH  
Binzstrasse 67  
8712 Stäfa  
Tel.: 044 536 02 25  
[www.vinexio.ch](http://www.vinexio.ch)