



perfekte Passform  
modulare Individualität  
100% Swiss-made



like  
wearing  
nothing.

# SYSTEM & KOLLEKTION



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Swissflex-System</b>	3
• Merkmale	
• System	
• Vorteile	
<b>2. Übersicht Kollektion</b>	4
• Modulare Brillensysteme	
• Einzigartiges Passformsystem	
• Innovative Fassungselemente	
<b>3. Verkaufs- und Promotionsansatz</b>	6
• Präsenz im Shop	
• Verkaufsansatz	
• Argumentation & Demonstration	
<b>4. Information, Unterstützung und Bestellung</b>	7
<b>5. Modellsystem SF classic</b>	8
<b>6. Modellsystem SF rainbow</b>	24
<b>7. Modellsystem SF loop</b>	32
<b>8. Montageinformationen</b>	48
• Nasenpads / Montage und Demontage	
• Bügel / Montage und Demontage	
• Identifikation von Modell, Kastenmass und Grösse	

# 1. Swissflex-System

**Swissflex Eyewear ist ein modulares Brillensystem  
für besten Tragekomfort mit personalisierbarem Stil  
für jedes Alter und viele Aktivitäten**

## Merkmale

Das Swissflex-Brillensystem wurde 1998 lanciert und ist nun in über 20'000 Partner-Shops und 50 Ländern präsent. Swissflex-Brillen zeichnen sich aus durch:

- **Perfekte Passform**  
Flexibles, stabiles, ultraleichtes und allergiefreies High-Tech-Polymer. Fittingsysteme für Nase, Kopf und Ohren zur Anpassung an jede Gesichtsform.
- **Modulare Individualität**  
Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten schaffen personalisierbare Funktionalität und Stil.
- **100% Swiss-made**  
Entwicklung und Produktion in der Schweiz garantiert beste Materialien, präzise Verarbeitung und höchste Qualität.

## System

Swissflex Eyewear wird weltweit mit einem bewährten System über eigenständige lokale Distributoren und mit geschulten Partneroptikern verkauft:

- Demokollektion für Präsentation im Shop (24+ Brillen, >50% Erwachsene)
- Initialschulung von Verkaufsmitarbeitern
- Zentralverglaste Brille von OW zum Anpassen beim Optiker
- Verkauf von mindestens 1 Fassung pro Woche aus gesamtem Swissflex-Sortiment
- Vernetzung mit Ophthalmologen, Optometristen und Orthoptisten in der Nachbarschaft

## Vorteile (mehr Infos: [www.vinexio.ch](http://www.vinexio.ch))

Das Swissflex-System bietet für Unternehmer im Optikbereich ein einzigartiges, effizientes und exklusives Geschäftsmodell mit 8 Vorteilen:

- hohe Kundenloyalität
- langfristige Bestseller
- passend für jedes Alter
- 100% Swiss-made
- unabhängiger Hersteller
- kein Lager
- kein Online-Verkauf
- Empfehlung von O's

## 2. Übersicht Kollektion

### System loop

#### SF loop

- glasformadaptive Front / 10 Glasformen
- 8 polierte Farben



#### SF loop Kid

- glasformadaptive Front / 13 Glasformen
- 15 polierte Farben (\*zusätzlich als Frostyfarbe)




#### SF loop Baby

- glasformadaptive Front / 4 Glasformen
- 8 polierte Farben (\*alle auch als Frostyfarbe)



### System rainbow

#### SF rainbow

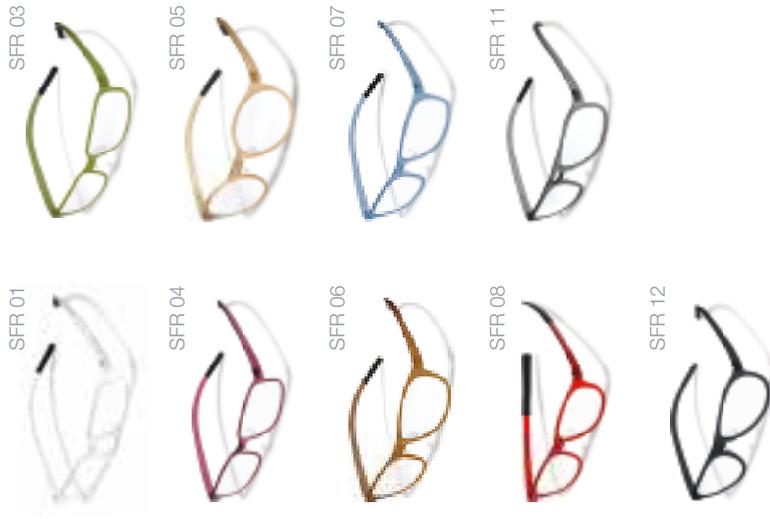

- 9 Fronten
  - 9 matte Farben
- 15 19 37 50 52 60 61 64 67

### System classic

#### SF classic

- viele Glasformen
- 21 polierte Farben (\*zusätzlich als Frostyfarbe)



#### SF classic Contur

- viele Glasformen
- 31 Fassungsfarben poliert und frosty (wie SFC)
- 22 Conturfarben



#### SF classic Kid

- viele Glasformen
- 13 polierte Farben (\*zusätzlich als Glitzerfarbe)



## Modulare Brillensysteme



## Einzigartiges Passformsystem

### Nasenpads für alle Modelle



### Endstücke je nach Modell



### Bügel für alle Modelle



## Innovative Fassungs-elemente

### Brücke/Front

- spannungsarme Fixierung
- glasformadaptiv (loop)



### Bügel

- thermoplastische Verformung
- Click-in Verbindung (1/100mm)



### Endstücke

- körpertemperatursensitiv
- rutschfestes Material



### Nasenpads

- ergonomische Passform
- diverse Systeme




### Farben

- unterschiedliche Oberflächen
- kompondiert (im Material)



### Material

- eigene Rezepturen (stabil & flexibel)
- medizinische Eigenschaften

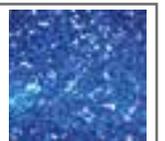

### 3. Verkaufs- und Promotionsansatz

#### Präsenz im Shop – kompakt und strukturiert

Die Demo-Kollektion mit den Modellsystemen für Erwachsene und Kinder werden kompakt und strukturiert mit Swissflex-Kacheln an der Wand präsentiert.



So kann das Brillensystem einfach erklärt werden und es bieten sich viele Möglichkeiten für Zweitbrillenverkäufe an den Kunden, sowie an Personen in dessen Umfeld.

#### Verkaufsansatz - Tragekomfort und Personalisierung erleben lassen

Der bewährte Verkaufsansatz basiert auf dem einzigartigen Swissflex-Tragegefühl – like wearing nothing.

##### 1. Jeden Kunden als potentiellen SF-Träger einschätzen

##### 2. Tragekomfort spüren lassen

Neugier: Möchten Sie etwas Neues / Einzigartiges / Interessantes / Schweizerisches / ... sehen?

Interesse: Den Kunden eine Swissflex-Demobrille aufsetzen lassen

Wunsch: Bei positiver Reaktion (wow, die ist aber leicht / kaum spürbar / ...) weitermachen

##### 3. System, Personalisierung und Besonderheiten zeigen

Modulares Brillensystem, bezüglich Passform und Stil individuell anpassbar

Modellsysteme Randlos, Halbrand, Vollrand und Kinder

Demonstration von spezifischen Merkmalen mit Fassung in der Hand

##### 4. Modellsystem wählen

Individualisierungsmöglichkeiten aufzeigen und erleben lassen

##### 5. Persönliche Brille konfigurieren

## Argumentation & Demonstration – mit Fassung in der Hand

Alleinstellungsmerkmal	Bester Tragekomfort und personalisierter Stil			
Unterscheidungsmerkmale	<b>Perfekte Passform</b>		<b>Modulare Individualität</b>	<b>100% Swiss-made</b>
<b>Grund für Annahme</b>	Einzigartige Passform-Systeme für Nase, Kopf und Ohr	Hightech Polymer mit medizinischen Eigenschaften	Modulares System von Fassungselementen	Entwicklung und Herstellung in der Schweiz
<b>Produktvorteile</b>	Perfekte Anpassung für jedes Gesicht	Ultraleicht und stabil, flexibel, angenehme Haptik, antiallergisch, metallfrei	Personalisierbare Brille	High-tech Engineering und Produktion mit höchster Präzision und Sorgfalt
<b>Kundenutzen</b>	Massgeschneidertes Gefühl und konstant scharfe Sicht ohne Ermüdung der Augen	Natürliches Gefühl ohne Hautirritationen (keine Druckstellen, kein Rutschen, keine Kopfschmerzen)	Brille, die optimal dem individuellen Stil und Verwendungszweck entspricht	Bemerkenswerte Qualität mit optimaler Balance zwischen Gewicht und Stabilität
<b>Markenaussage</b>	<b>like wearing nothing.</b>			

## 4. Information, Unterstützung und Bestellung



SF Info-Website  
[www.vinexio.ch/login](http://www.vinexio.ch/login)  
 Benutzername: Partner  
 Passwort: Swissflex7



Bestellungen SF Komplettbrillen auf  
[www.optiswiss.ch](http://www.optiswiss.ch) - Bestellportal



SF Infolyer



Digitales Bestellformular  
 (nur mit Acrobat Reader)  
 für Bestellungen ab Vinexio Atelier

## 5. Modellsystem SF classic



SF classic




SF classic Contur




SF classic Kid

## SF classic / SF classic Contur

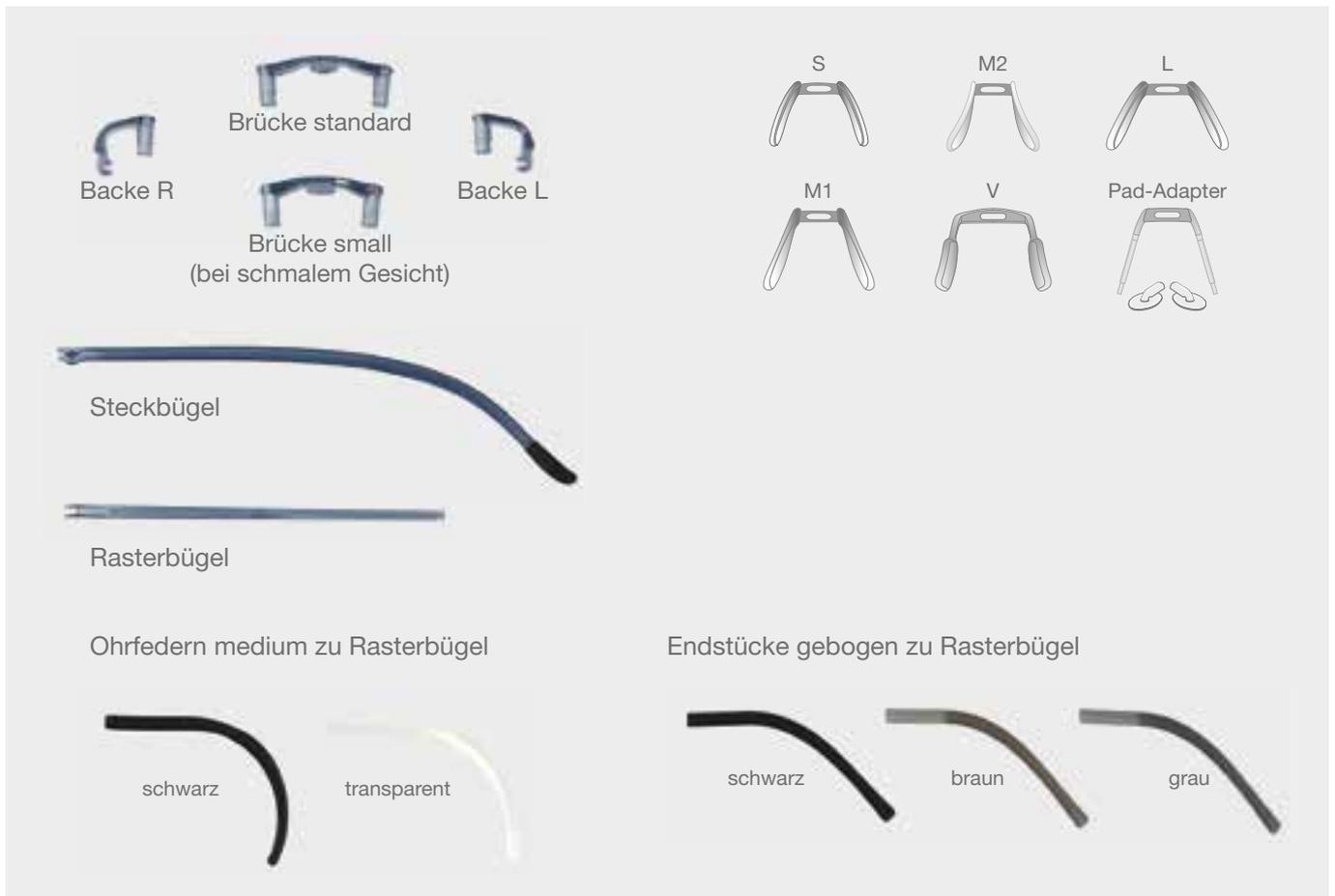

## SF classic Kid

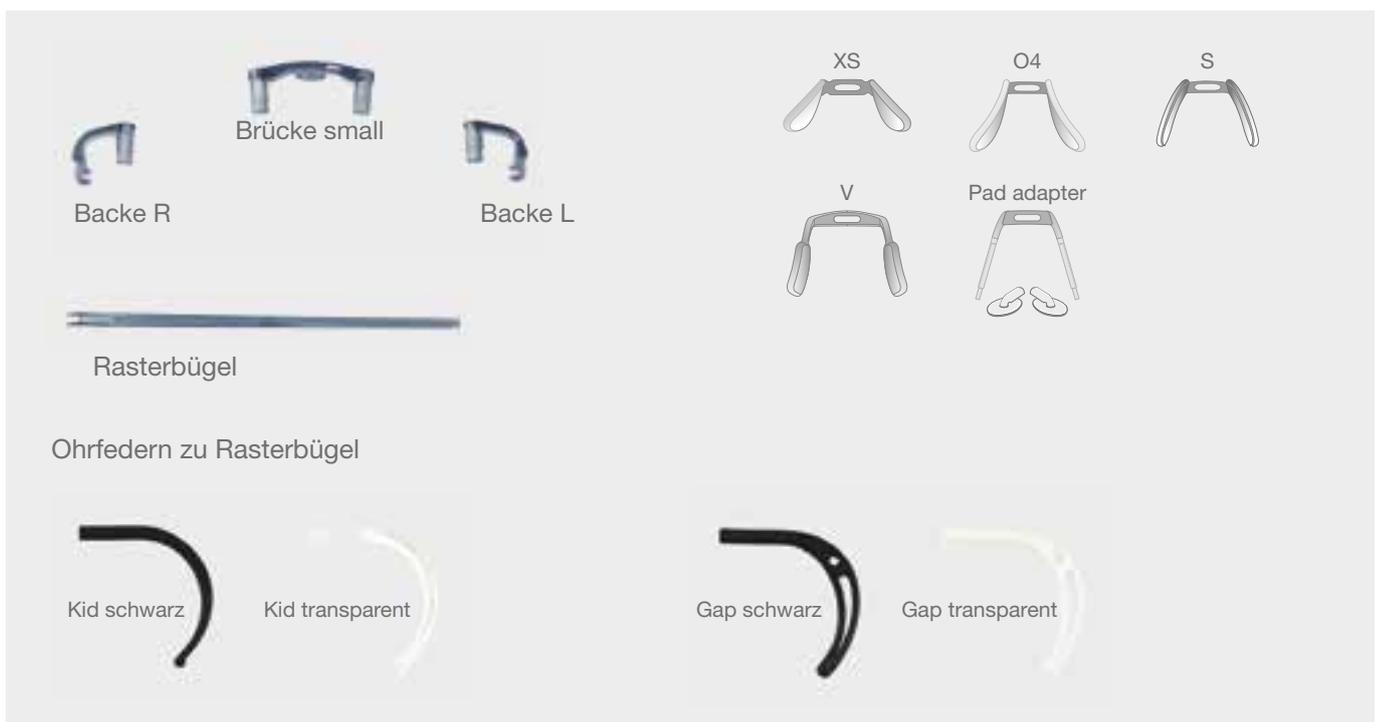

## SF classic / Produktblatt





## SF classic / Farben poliert und frosty

	15	ice-blue*		67	crimson
	19	smokey*		68	mocca*
	33	green		72	lightpink*
	34	mint		75	whitesmoke
	35	pink-transparent		83	arctic-blue
	37	cinnamon*		84	cyan
	50	translucent*		89	white pearl
	52	brownish*		97	carribbean blue
	53	ashen			
	60	black*			
	61	amethyst*			
	64	steel-blue*			
	65	orchid			

\* auch als Frosty-Farbe verfügbar



## SF classic / Glasformen

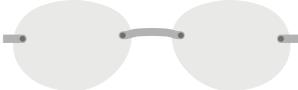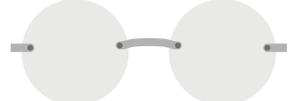	<b>2</b> 50   52   54		<b>2112</b> 48   50   52		<b>2126</b> 50   52   54
	<b>2101</b> 50   52   54		<b>2113</b> 50   52   54		<b>2127</b> 50   52   54
	<b>2102</b> 50   52   54		<b>2114</b> 50   52   54		<b>2128</b> 48   50   52
	<b>2103</b> 48   50   52		<b>2116</b> 50   52   54		<b>2129</b> 50   52   54
	<b>2104</b> 48   50   52		<b>2117</b> 48   50   52		<b>2147</b> 53   55   57
	<b>2105</b> 50   52   54		<b>2118</b> 50   52   54		<b>2148</b> 45   47   49
	<b>2106</b> 50   52   54		<b>2119</b> 50   52   54		<b>2149</b> 52   54   56
	<b>2107</b> 52   54   56		<b>2120</b> 54   56   58		<b>2151</b> 47   49   51
	<b>2108</b> 50   52   54		<b>2122</b> 48   50   52		<b>2155</b> 52   54   56
	<b>2109</b> 50   52   54		<b>2123</b> 48   50   52		<b>2156</b> 52   54   56
	<b>2110</b> 50   52   54		<b>2124</b> 48   50   52		<b>2157</b> 50   52   54
	<b>2111</b> 50   52   54		<b>2125</b> 48   50   52		<b>2158</b> 52   54   56



## SF classic Contur / Produktblatt



## SF classic Contur / Farben Contur-Folien



AV29 Havana striped



GR15 Gold



SF504 Graphite



AV36 Havana mellow



LG15 Rose Shiny



SF505 Ruby



B12 Dark Brown



NE1 Black



SF509 Azure



B32 Light Brown



RR15 Red Shiny



SF510 Pastel-blue



B55 Blue



S32 Light Smoke



SF511 Lilac



BL1 Dark Blue



SB15 Silver Shiny



SF516 Porcelaine



BW20 Blue Shiny



SF503 Olive




SF517 Copper



G15 Grey Green

## SF classic Contur / Glasformen und Designs

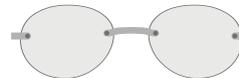Glasform	Design 01	Design 11	Design 33
c101	 <b>c101 D01</b> 47   49   51	 <b>c101 D11</b> 47   49   51	 <b>c101 D33</b> 47   49   51
c107	 <b>c107 D01</b> 50   52   54	 <b>c107 D11</b> 50   52   54	 <b>c107 D33</b> 50   52   54
c120	 <b>c120 D01</b> 45   47   49	 <b>c120 D11</b> 45   47   49	 <b>c120 D33</b> 45   47   49
c130	 <b>c130 D01</b> 51   53   55	 <b>c130 D11</b> 51   53   55	 <b>c130 D33</b> 51   53   55
c132	 <b>c132 D01</b> 50   52   54	 <b>c132 D11</b> 50   52   54	 <b>c132 D33</b> 50   52   54
c133	 <b>c133 D01</b> 51   53   55	 <b>c133 D11</b> 51   53   55	 <b>c133 D33</b> 51   53   55
c138	 <b>c138 D01</b> 49   51   53	 <b>c138 D11</b> 49   51   53	 <b>c138 D33</b> 49   51   53
c140	 <b>c140 D01</b> 51   53   55	 <b>c140 D11</b> 51   53   55	 <b>c140 D33</b> 51   53   55
c141	 <b>c141 D01</b> 50   52   54	 <b>c141 D11</b> 50   52   54	 <b>c141 D33</b> 50   52   54
c142	 <b>c142 D01</b> 47   49   51	 <b>c142 D11</b> 47   49   51	 <b>c142 D33</b> 47   49   51
c144	 <b>c144 D01</b> 50   52   54	 <b>c144 D11</b> 50   52   54	 <b>c144 D33</b> 50   52   54
c145	 <b>c145 D01</b> 49   51   53	 <b>c145 D11</b> 49   51   53	 <b>c145 D33</b> 49   51   53
c146	 <b>c146 D01</b> 50   52   54	 <b>c146 D11</b> 50   52   54	 <b>c146 D33</b> 50   52   54
c148	 <b>c148 D01</b> 48   50   52	 <b>c148 D11</b> 48   50   52	 <b>c148 D33</b> 48   50   52
c152	 <b>c152 D01</b> 50   52   54	 <b>c152 D11</b> 50   52   54	 <b>c152 D33</b> 50   52   54
c168	 <b>c168 D01</b> 46   48   50 52   54   56	 <b>c168 D11</b> 46   48   50 52   54   56	 <b>c168 D33</b> 46   48   50 52   54   56

weitere Designs



**c107 D23**  
50 | 52 | 54



**c107 D40**  
50 | 52 | 54



**c120 D22**  
45 | 47 | 49



**c120 D40**  
45 | 47 | 49



**c120 D53**  
45 | 47 | 49



**c102 D01**  
52 | 54 | 56



**c121 D01**  
46 | 48 | 50



**c172 D10**  
46 | 48 | 50



**c103 D01**  
52 | 54 | 56



**c126 D01**  
51 | 53 | 55



**c173 D01**  
50 | 52 | 54



**c105 D01**  
54 | 56 | 58



**c134 D21**  
49 | 51 | 53



**c174 D04**  
51 | 53 | 55



**c110 D01**  
50 | 52 | 54



**c139 D01**  
51 | 53 | 55



**c175 D03**  
48 | 50 | 52



**c113 D01**  
53 | 55 | 57



**c143 D11**  
51 | 53 | 55



**c175 D11**  
48 | 50 | 52



**c114 D01**  
54 | 56 | 58



**c143 D33**  
51 | 53 | 55



**c176 D25**  
49 | 51 | 53



**c116 D01**  
48 | 50 | 52



**c148 D11**  
48 | 50 | 52



**c177 D41**  
48 | 50 | 52



**c119 D01**  
48 | 50 | 52



**c163 D27**  
51 | 53 | 55



**c178 D11**  
50 | 52 | 54



**c120 D51**  
45 | 47 | 49



**c170 D28**  
50 | 52 | 54



**c179 D11**  
51 | 53 | 55



**c120 D52**  
45 | 47 | 49



**c172 D05**  
46 | 48 | 50



**c182 D42**  
49 | 51 | 53

Alle Glasformen von SF classic Contur können auch als SF classic ohne Kontur bestellt werden. Dann wird das „c“ durch die Zahl „3“ ersetzt (SFCC c168 ⇨ SFC 3168).

Weitere Glasformen finden Sie unter [www.vinexio.ch](http://www.vinexio.ch) im Login-Bereich.



## SF classic Kid / Produktblatt



**Rasterbügel**  
- 3 Ohrfedern

13 polierte Farben  
7 Glitzerfarben



1 Backe

Nasenpads  
- 5 Grössen

1 Brücke (26mm)


## SF classic Kid / Farben poliert


	15	ice-blue*
	16	violet-transparent*
	34	mint
	35	pink-transparent*
	50	translucent*
	51	peach
	62	turquoise*
	64	steel-blue
	67	crimson*
	71	khaki
	72	lightpink*
	78	mango
	83	arctic-blue

\* auch als Glitzer-Farbe verfügbar




## SF classic Kid / Glasformen

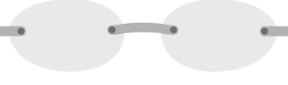	<b>02</b> 40   42   44		<b>906</b> 42   44   46		<b>1766</b> 44   46   48
	<b>33</b> 40   42   44		<b>999</b> 40   42   44		<b>1767</b> 44   46   48
	<b>42</b> 42   44   46		<b>1295</b> 43   45   47		<b>1768</b> 42   44   46
	<b>54</b> 42   44   46		<b>1539</b> 45   47   49		<b>1770</b> 44   46   48
	<b>179</b> 46   48   50		<b>1622</b> 47   49   51		<b>1798</b> 41   43   45
	<b>379</b> 41   43   45		<b>1659</b> 44   46   48		<b>1799</b> 44   46   48
	<b>386</b> 41   43   45		<b>1701</b> 44   46   48		<b>1803</b> 45   47   49
	<b>409</b> 40   42   44		<b>1705</b> 44   46   48		<b>1804</b> 43   45   47
	<b>513</b> 40   42   44		<b>1761</b> 45   47   49		<b>1805</b> 42   44   46
	<b>630</b> 42   44   46		<b>1762</b> 46   48   50		<b>1807</b> 40   42   44
	<b>746</b> 45   47   49		<b>1763</b> 44   46   48		<b>1808</b> 43   45   47
	<b>776</b> 42   44   46		<b>1765</b> 46   48   50		<b>1809</b> 42   44   46

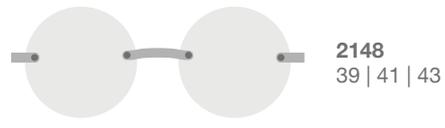

## SF classic / Anpassung

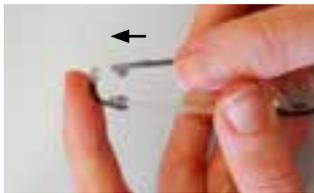

### Bügel / Montage

Fixieren der Backe (Gegenhalten mit Finger).  
Bügel parallel zur Front halten und in das Scharnier klicken.



Fertig montierte Brillenfassung (ungerichtet).



### Bügel / Demontage

Schliessen des Bügels.  
Fixieren der Backe mit Daumen und Finger.  
Ruckartiges Ziehen des geschlossenen Bügels in Richtung Bügelende (Öffnungsrichtung des Scharniers beachten!).



### Nasenpad / Montage

Vorbereitung der Pad-Montage, Einführen der Montagehilfe (Keil) in den Pad.



Brücke mit Pilz nach unten senkrecht auf die Montagehilfe im Pad auflegen und bis zum Einklicken drücken.



Korrekten Sitz überprüfen.




### Nasenpad / Demontage

Flügel mit beiden Daumen durch den Nasenausschnitt der Fassung drücken, bis Pad ausklickt.




### Backe anpassen

Ecke bei geöffnetem Bügel aus zwei Richtungen punktuell gleichmässig erwärmen.  
Dabei das Glas schützen.  
Temperatur auf Abstand anpassen.

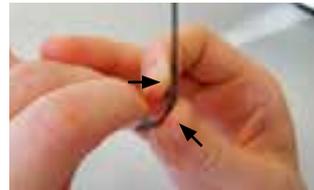


### Öffnungswinkel vergrössern

An der erwärmten Ecke nach Bedarf vorsichtig den Winkel vergrössern.

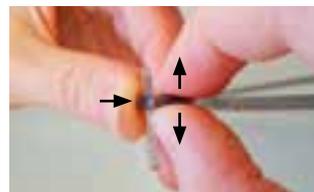

### Inklination verändern

An der erwärmten Ecke nach Bedarf die Inklination verändern.

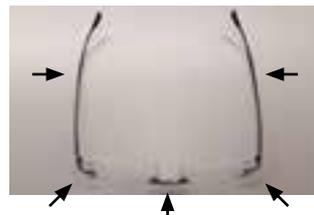

### Mögliche Anpassungsbereiche

- Brücke (Entfernung des Pads vorab notwendig)
- Backen
- Bügel (Scharnierbereich nicht erwärmen!)

Temperatur auf Abstand anpassen.



Abb.1: Korrekte Handhabung

### Korrekte Reinigung

Zur Reinigung mit einem Putztuch, die Fassung immer an zwei Punkten (Brücke + Backe) des zu reinigenden Glases fixieren.

Rotationsbewegung zwischen Brillenglas und Modulteil vermeiden.



Abb.2: Falsche Handhabung

Es wird empfohlen, die Brille mit Wasser und Seife zu reinigen.

Anzeichnungen und Kleberückstände an der Fassung können mit Aceton entfernt werden.

Reinigungen mit Lösungsmitteln und Alkohol (z.B. Isopropanol) sind zu vermeiden.

Seife und Wasser



Aceton



Alkohol





## 6. Modellsystem SF rainbow




Vollrand

## SF rainbow / Passformsystem



Mittelteil (9 Fronten)

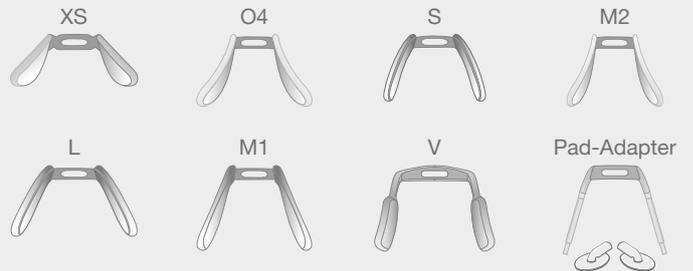

Steckbügel



Rasterbügel

Endstück gerade für Rasterbügel



schwarz

Endstück gebogen für Rasterbügel



schwarz



braun




grau

Ohrfeder medium für Rasterbügel



schwarz

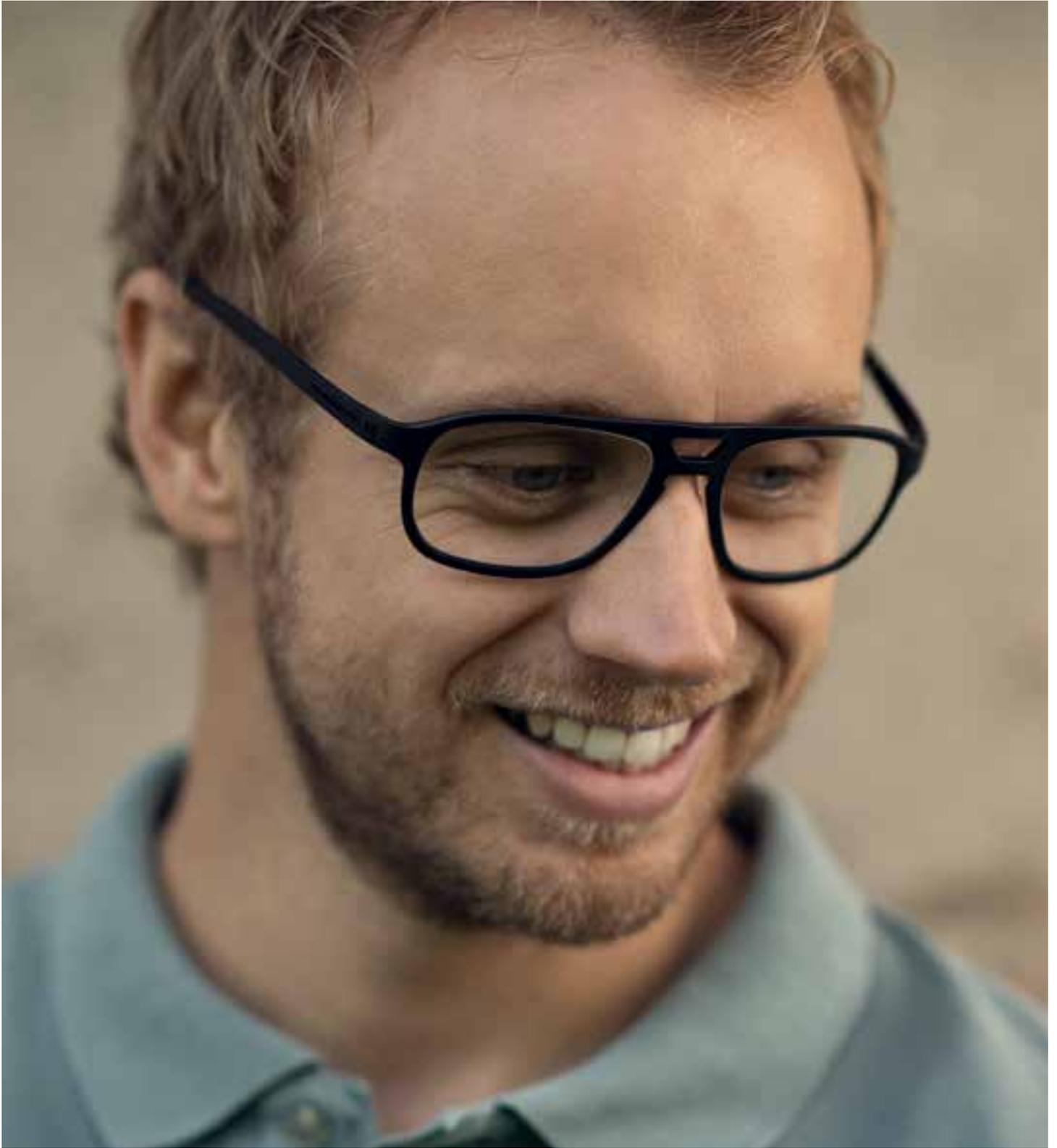

SF rainbow

## SF rainbow / Produktblatt



## SF rainbow / Farben matt

	15	ice-blue
	19	smokey
	37	cinnamon
	50	translucent
	52	brownish
	60	black
	61	amethyst
	64	steel blue
	67	crimson

## SF rainbow / Glasformen



**R-01**  
48



**R-07**  
56



**R-03**  
52



**R-08**  
48



**R-04**  
54



**R-11**  
53



**R-05**  
49,5




**R-12**  
54



**R-06**  
55

## SF rainbow / Anpassung

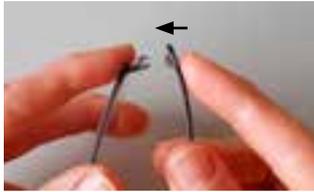

### Bügel / Montage

Fixieren der Backe (Gegenhalten mit Finger).  
Bügel parallel zur Front halten und in das Scharnier klicken.



Fertig montierte Brillenfassung (ungerichtet).



### Bügel / Demontage

Bügel schliessen.  
Backe mit Daumen und Finger fixieren.  
Daumen gegen den Bügel halten, Bügel leicht schräg zur Front wegziehen.



### Nasenpad / Montage

Vorbereitung der Pad-Montage, Einführen der Montagehilfe (Keil) in den Pad.



Front mit Pilz nach unten senkrecht auf die Montagehilfe im Pad auflegen und bis zum Einklicken drücken.



Korrekten Pad Sitz überprüfen.




### Nasenpad / Demontage

Flügel mit beiden Daumen durch den Nasenausschnitt der Fassung drücken, bis Pad ausklickt.



### Ecke anpassen

Ecke bei geöffnetem Bügel aus zwei Richtungen punktuell, vor allem an der Innenseite, langsam und gleichmässig erwärmen. Dabei das Glas schützen. Temperatur auf Abstand anpassen.

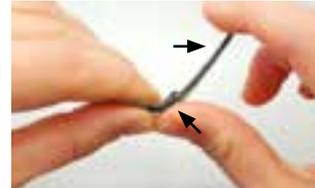


An der erwärmten Ecke nach Bedarf vorsichtig den Öffnungswinkel ändern.



### Bügel anpassen

Bügel aus zwei Richtungen punktuell, vor allem an der Innenseite, langsam und gleichmässig erwärmen. Temperatur auf Abstand anpassen.

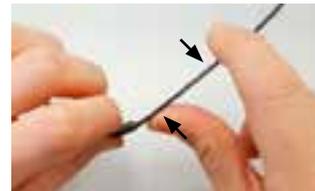


An der erwärmten Stelle nach Bedarf vorsichtig den Öffnungswinkel verändern.




### Inklination verändern

Fassungsrand langsam und gleichmässig vor der Backe und hinter der Ecke erwärmen.

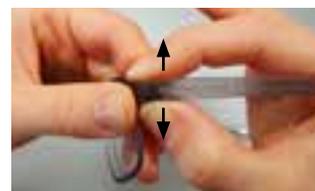

An der erwärmten Ecke nach Bedarf die Inklination verändern.

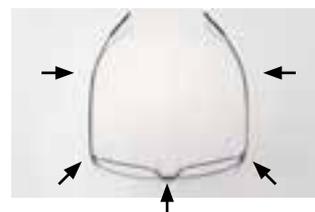

### Mögliche Änderungsbereiche

- Ecken (Entfernung des Pads vorab notwendig)
- Bügel (Scharnierbereich nicht erwärmen!)

Temperatur auf Abstand anpassen.

- Seife und Wasser
- Aceton
- Alkohol



## 7. Modellsystem SF loop



SF loop




SF loop Kid



SF loop Baby

## SF loop

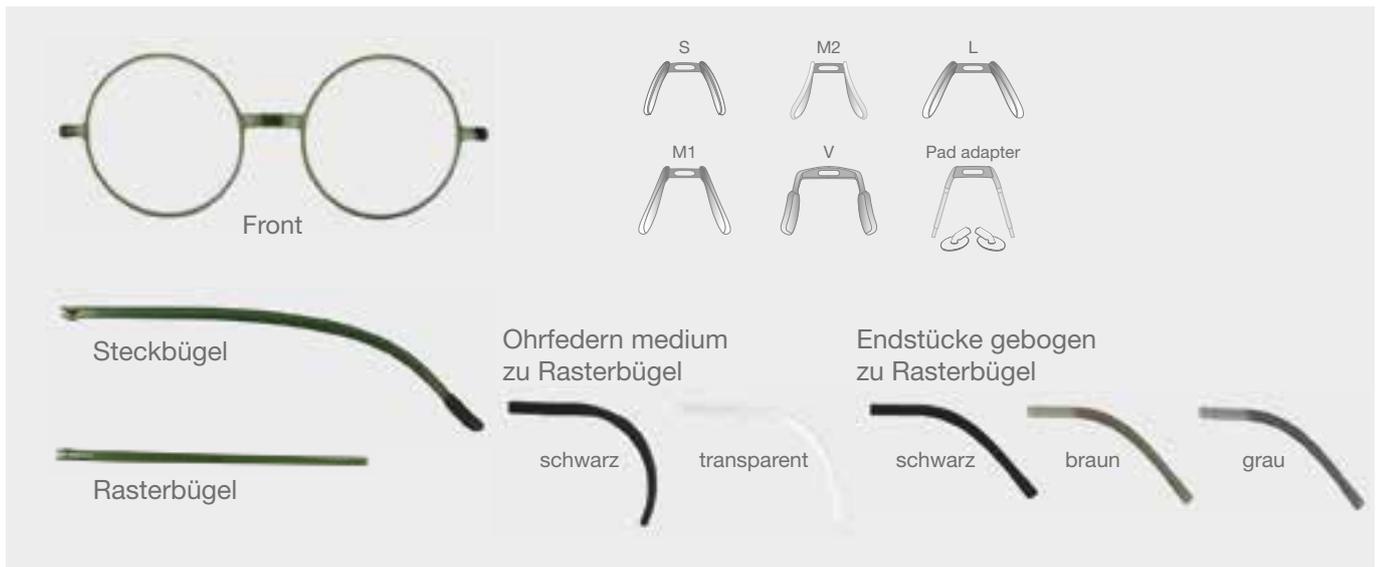

## SF loop Kid



## SF loop Baby





SF loop

## SF loop / Produktblatt

**Rasterbügel**  
- 3 Ohrfedern

**Steckbügel**  
- 1 Endstück

**Nasenpads**  
- 6 Grössen

**10 Fronten in  
je 3 Grössen**


**8 polierte Farben**




## SF loop (Ø42, 44, 48) / Farben poliert

	15	ice-blue
	19	smokey
	33	green
	37	cinnamon
	50	translucent
	60	black
	67	crimson
	83	arctic-blue


## SF loop / Glasformen

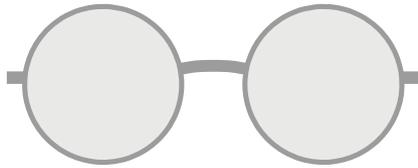

**5401**  
KM: 42 | 44 | 48  
Ring: 42 | 44 | 48

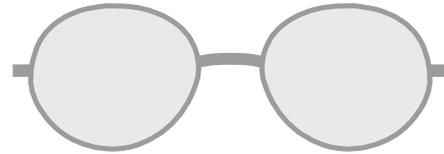


**5406**  
KM: 46 | 48 | 52  
Ring: 42 | 44 | 48

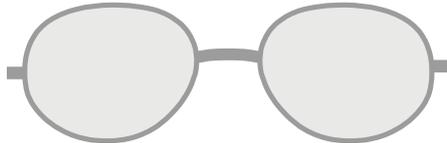


**5402**  
KM: 47 | 49 | 53  
Ring: 42 | 44 | 48




**5407**  
KM: 49 | 52 | 56  
Ring: 42 | 44 | 48

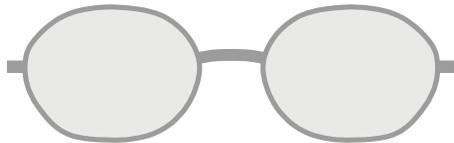


**5403**  
KM: 47 | 50 | 54  
Ring: 42 | 44 | 48

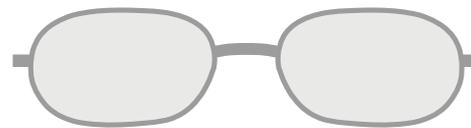


**5408**  
KM: 50 | 52 | 57  
Ring: 42 | 44 | 48

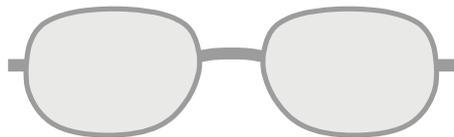


**5404**  
KM: 47 | 49 | 54  
Ring: 42 | 44 | 48

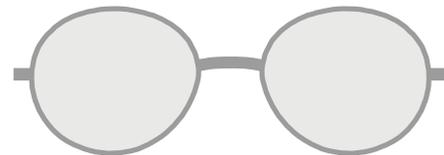


**5409**  
KM: 45 | 47 | 52  
Ring: 42 | 44 | 48

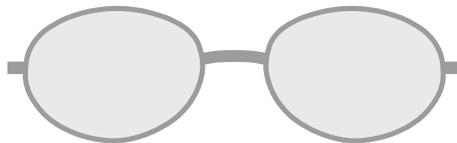

**5405**  
KM: 48 | 50 | 55  
Ring: 42 | 44 | 48

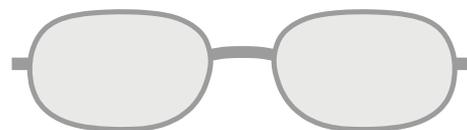

**5410**  
KM: 49 | 51 | 56  
Ring: 42 | 44 | 48

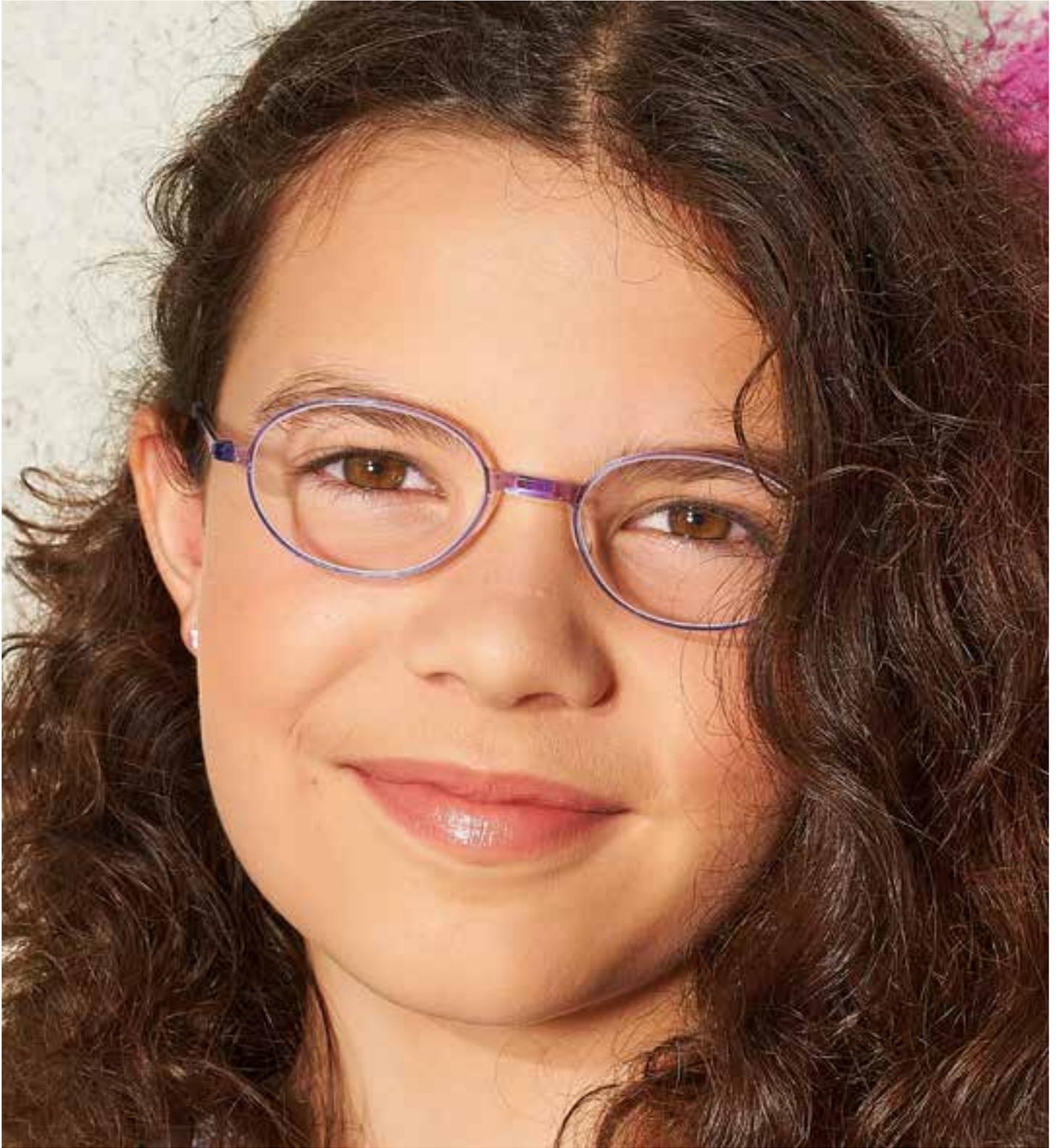

SF loop Kid

## SF loop Kid / Produktblatt

**Rasterbügel**  
- 3 Ohrfedern



**Nasenpads**  
- 5 Grössen

**13 Fronten in  
je 3 Grössen**


**15 polierte Farben  
8 Frosty-Farben**

## SF loop Kid (Ø36, 38, 40) / Farben poliert

	15	ice-blue*		72	lightpink*
	16	violet-transparent*		78	mango
	34	mint*		83	arctic-blue*
	35	pink-transparent*		97	caribbean-blue
	37	cinnamon			
	50	translucent			
	51	peach			
	60	black			
	62	turquoise*			
	64	steel-blue			
	67	crimson*			

\* auch als Frosty-Farbe verfügbar

## SF loop Kid / Glasformen

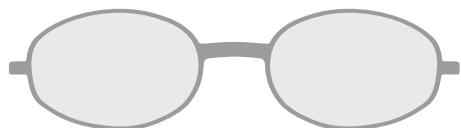

**5101**  
KM: 42 | 44 | 46  
Ring: 36 | 38 | 40




**5108**  
KM: 43 | 45 | 47  
Ring: 36 | 38 | 40



**5102**  
KM: 43 | 45 | 47  
Ring: 36 | 38 | 40




**5109**  
KM: 42 | 44 | 46  
Ring: 36 | 38 | 40

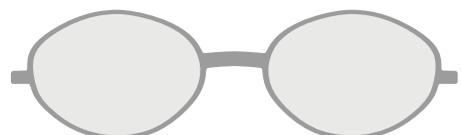

**5103**  
KM: 42 | 44 | 46  
Ring: 36 | 38 | 40




**5110**  
KM: 39 | 41 | 43  
Ring: 36 | 38 | 40

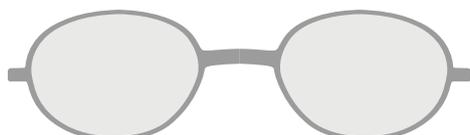

**5104**  
KM: 42 | 44 | 46  
Ring: 36 | 38 | 40




**5111**  
KM: 41 | 43 | 45  
Ring: 36 | 38 | 40

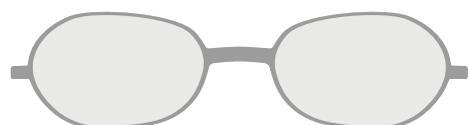


**5105**  
KM: 43 | 45 | 47  
Ring: 36 | 38 | 40




**5112**  
KM: 42 | 44 | 46  
Ring: 36 | 38 | 40

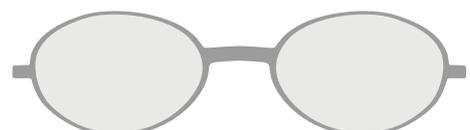

**5106**  
KM: 42 | 44 | 46  
Ring: 36 | 38 | 40

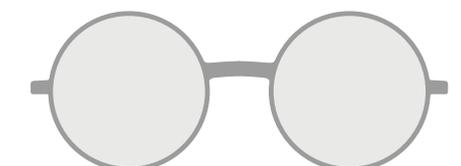

**5113**  
KM: 36 | 38 | 40  
Ring: 36 | 38 | 40

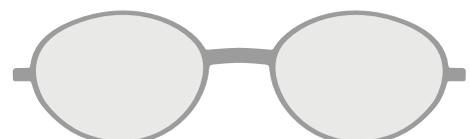

**5107**  
KM: 42 | 44 | 46  
Ring: 36 | 38 | 40



SF loop Baby

## SF loop Baby / Produktblatt

**Rasterbügel**  
- 2 Ohrfedern

**Nasenpad**  
- 2 Grössen

**4 Fronten in  
je 2 Grössen**

**8 polierte Farben  
8 Frosty-Farben**




## SF loop Baby (Ø34, 36) / Farben poliert

	15	ice-blue*
	16	violet-transparent*
	34	mint*
	35	pink-transparent*
	50	transparent*
	51	peach*
	72	lightpink*
	83	arctic-blue*

\* auch als Frosty-Farbe verfügbar


## SF loop Baby / Glasformen

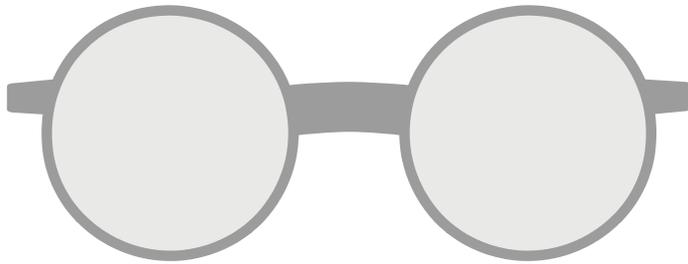

### Modell 5201

Kastenmass: 34 | 36


Ring: 34 | 36

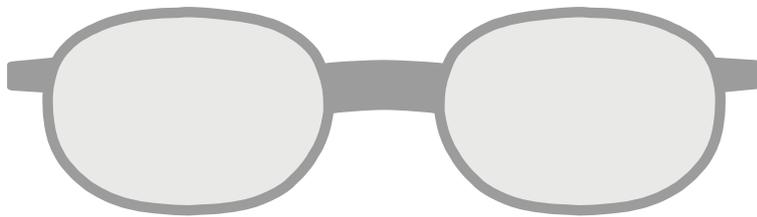

### Modell 5202

Kastenmass: 39 | 41


Ring: 34 | 36

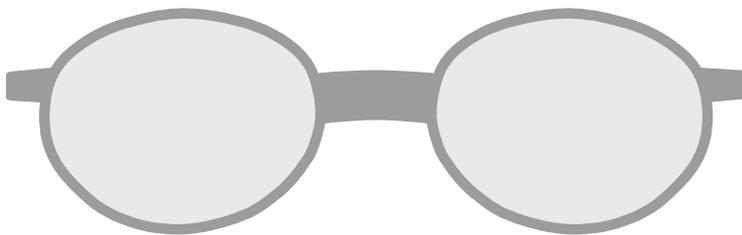

### Modell 5203

Kastenmass: 38 | 40

Ring: 34 | 36

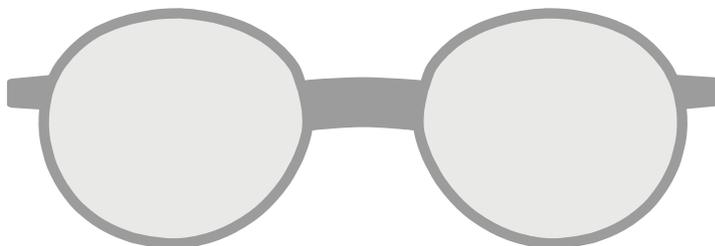


### Modell 5204

Kastenmass: 36 | 38

Ring: 34 | 36

## SF loop / Anpassung

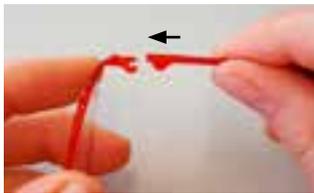

### Bügel / Montage

Fixieren der Backe (Gegenhalten mit Finger).  
Bügel längs zum Scharnier halten und in das Scharnier klicken.



Weitere Möglichkeit: Fixieren der Backe.  
Position des Bügels parallel zur Front.  
Einführen des Bügels in das Scharnier bis zum Einrasten.



Fertig montierte Brillenfassung (ungerichtet).



### Bügel / Demontage

Öffnen des Bügels.  
Fixieren der Backe mit Daumen und Finger.  
Ruckartiges Ziehen des Bügels in Richtung Bügelende.



### Nasenpad / Montage

Vorbereitung der Pad-Montage.  
Einführen der Montagehilfe (Keil) in den Pad.



Brücke mit Pilz nach unten senkrecht auf die Montagehilfe im Pad auflegen und bis zum Einklicken drücken.



Korrekten Sitz überprüfen.



### Nasenpad / Demontage

Flügel mit beiden Daumen durch den Nasenausschnitt der Fassung drücken, bis Pad ausklickt.




### Backe anpassen

Backe bei geöffnetem Bügel aus zwei Richtungen punktuell gleichmässig erwärmen.  
Dabei das Glas schützen.  
Temperatur auf Abstand anpassen.




### Öffnungswinkel vergrössern

An der erwärmten Backe nach Bedarf vorsichtig den Winkel vergrössern.

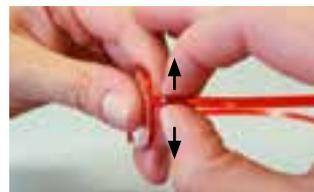

### Inklination verändern

An der erwärmten Backe nach Bedarf die Inklination verändern.

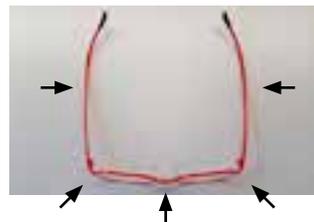

### Mögliche Änderungsbereiche

- Brücke (Entfernung des Pads vorab notwendig)
- Backen
- Bügel (Scharnierbereich nicht erwärmen!)

Temperatur auf Abstand anpassen.

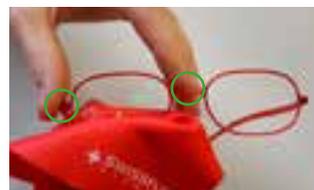


Abb.1: Korrekte Handhabung

### Korrekte Reinigung

Zur Reinigung mit einem Putztuch, bitte die Fassung immer an zwei Punkten (Brücke + Backe) des zu reinigenden Glases fixieren.

Schwingbewegungen vermeiden.



Abb.2: Falsche Handhabung

Es wird empfohlen, die Brille mit Wasser und Seife zu reinigen.

Anzeichnungen und Kleberückstände an der Fassung können mit Aceton entfernt werden.

Reinigungen mit anderen Lösungsmitteln und Alkohol (z.B. Isopropanol) sind zu vermeiden.

Seife und Wasser



Aceton



Alkohol




## SF loop Baby / Anpassung




### Backe anpassen

Backe bei geöffnetem Bügel aus zwei Richtungen punktuell gleichmässig erwärmen. Dabei das Glas schützen. Temperatur auf Abstand anpassen.

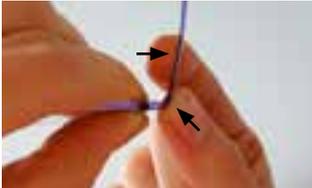


An der erwärmten Ecke nach Bedarf vorsichtig den Öffnungswinkel anpassen.

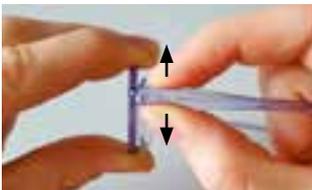

### Inklination verändern

An der erwärmten Ecke nach Bedarf die Inklination verändern.

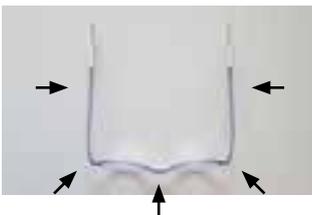

### Mögliche Änderungspunkte

- Brücke
- Backen
- Bügel

Temperatur auf Abstand anpassen.



Abb.1: Korrekte Handhabung

### Korrekte Reinigung

Zur Reinigung mit einem Putztuch, die Fassung immer an zwei Punkten (Brücke + Backe) des zu reinigenden Glases fixieren.

Schwingbewegungen vermeiden.



Abb.2: Falsche Handhabung

Es wird empfohlen, die Brille mit Wasser und Seife zu reinigen.

Anzeichnungen und Kleberückstände an der Fassung können mit Aceton entfernt werden.

Reinigungen mit anderen Lösungsmitteln und Alkohol (z.B. Isopropanol) sind zu vermeiden.

Seife und Wasser



Aceton




Alkohol



## 8. Montageinformationen

### Nasenpads / Montage und Demontage

Die modularen ergonomischen Nasenpads sichern einen guten Halt ohne Druckstellen.  
7 Grössen, 1 Adapter

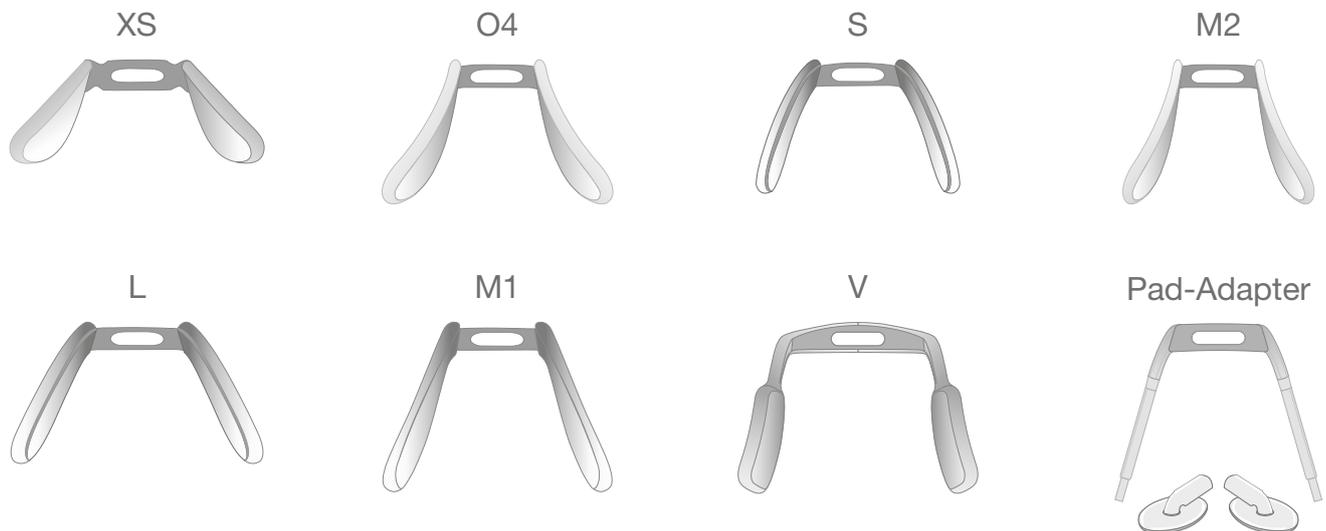

#### Montage (mit Montagetool):

Vorbereitung:

1. Pad auflegen (Flügel zeigen nach unten).
2. Montagehilfe (Keil) zur Fixierung in den Schlitz drücken.

Einklicken:

1. Mittelteil mit Pilz nach unten senkrecht auf den Keil auflegen.
2. Mittelteil senkrecht drücken, bis Pad Einklickt.



#### Demontage (Ausclicken):

1. Fassung mit Nasenpad nach unten positionieren.
2. Flügel mit beiden Daumen durch den Nasenausschnitt der Fassung drücken, bis Pad ausclickt.






#### Hinweis


1. Bei korrekter Handhabung wird der Nasenpad beim Ein- und Ausclicken nicht beschädigt.
2. Absichtlich straffes Ein- und Ausclicken für einen besseren Halt.

## Bügel / Montage und Demontage

 Ausführliche Montageanleitung pro Modell im Bereich „Sortiment“.
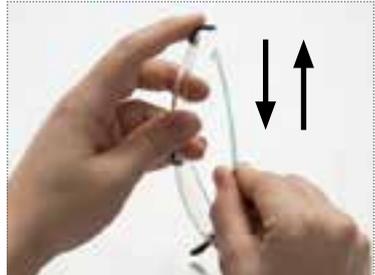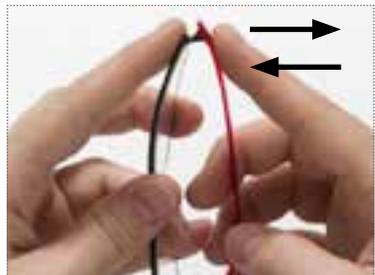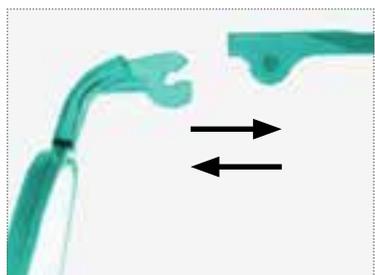
<p>SF classic</p>	<p>Montage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixieren der Backe</li> <li>• Position des Bügels parallel zur Front</li> <li>• Einführen des Bügels in das Scharnier, bis zum Einrasten</li> </ul> <p>Demontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Öffnungsrichtung des Scharniers beachten!</b></li> <li>• Fixierung der Backe</li> <li>• Ruckartiges Ziehen des Bügels in Richtung Bügelende</li> </ul>	
<p>SF rainbow</p>	<p>Montage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixieren der Ecke</li> <li>• Position des Bügels parallel zur Front</li> <li>• Einführen des Bügels in das Scharnier, bis zum Einrasten</li> </ul> <p>Demontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Öffnungsrichtung des Scharniers beachten!</b></li> <li>• Fixieren der Ecke mit Daumen und Finger</li> <li>• Bügel leicht öffnen, bis er ausklickt</li> </ul>	
<p>SF loop</p>	<p>Montage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixieren der Backe</li> <li>• Position des Bügels längs zum Scharnier</li> <li>• Einführen des Bügels in das Scharnier, bis zum Einrasten</li> </ul> <p>Demontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Öffnungsrichtung des Scharniers beachten!</b></li> <li>• Fixierung der Backe</li> <li>• Ruckartiges Ziehen des Bügels in Richtung Bügelende</li> </ul>	

## Identifikation von Modell, Kastenmass und Grösse

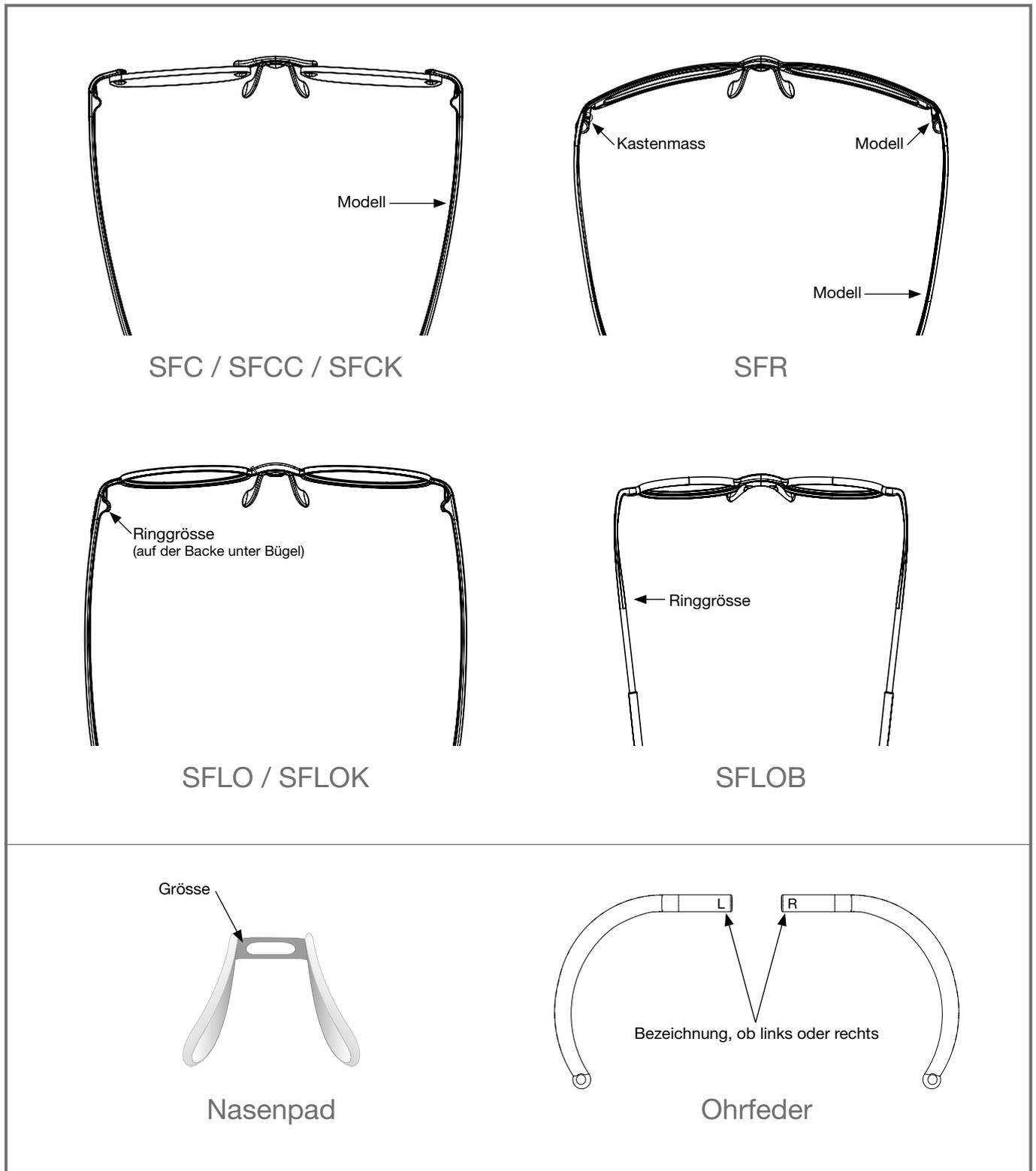





Vertrieb Swissflex Eyewear Schweiz

Vinexio GmbH  
Binzstrasse 67  
8712 Stäfa  
Tel.: 044 536 02 25  
[www.vinexio.ch](http://www.vinexio.ch)